

EURODENT[®]



AUTUMN
2020



I MIGLIORI PROFESSIONISTI SCELGONO EURODENT

Eurodent è un grande protagonista del settore odontoiatrico. Da **oltre 60 anni** progetta e realizza riuniti di qualità, aprendo nuove strade con prodotti ricchi di innovazione e di stile. Portano la firma Eurodent la prima poltrona a pantografo e i primi strumenti a bracci bilanciati. Così come il riunito Isotron by **Giugiaro Design** che si è aggiudicato il **Compasso d'Oro**, uno dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali per il design. I riuniti Eurodent sono **100% made in Italy**, affidabili, ergonomici ed estremamente intuitivi. **Sono scelti dai migliori professionisti in decine di Paesi.** Sono pronti ad accompagnare il tuo lavoro con qualità e affidabilità.



RELAX = FIDUCIA

“Eurodent sa quanto è importante per me avere pazienti rilassati e soddisfatti durante il trattamento. Così ha creato questo riunito, sicuro e confortevole, che mi aiuta a conquistare la fiducia dei miei clienti”

Dr. Maurice Soudry
Marsiglia, Francia

EURODENT

Care

RIUNITI IN PERFETTA EFFICIENZA

Eurodent Care è la divisione di Eurodent dedicata a tutti i professionisti che vogliono **mantenere in efficienza** il proprio riunito Eurodent classic, utilizzando solo ricambi originali e tecnici autorizzati.

CLINIC: TUTTO SOTTO CONTROLLO


Gli Eurodent Specialist possono eseguire un **check up completo del tuo riunito Eurodent**, verificando lo stato dei singoli componenti:

- 1 - Controllo dispositivi di sicurezza
- 2 - Controllo tastiere tavolette
- 3 - Controllo lampada
- 4 - Controllo filtro acqua
- 5 - Controllo filtro aria
- 6 - Controllo filtro silenziatore turbine
- 7 - Controllo filtro e tubi aspirazione
- 8 - Controllo attacco canule
- 9 - Controllo Canister
- 10 - Controllo disinfezione UV

Al termine del check up riceverai un preventivo per gli eventuali lavori di manutenzione. **Chiamaci subito per fissare un appuntamento:**
tel. 051 780465 - eurodent@eurodent.it

HIGH FIDELITY: LA FEDELTÀ TI PREMIA

Se invece vuoi sostituire il tuo riunito Eurodent classic con uno di ultima generazione, ti verrà riconosciuto un **bonus “alta fedeltà” di 500 €** sui prezzi che troverai nelle prossime pagine. Un’offerta ancora più conveniente perché ti permette di risparmiare anche sulla messa in opera. Infatti tutti i nuovi riuniti Eurodent sono stati progettati per essere installati con le **stesse connessioni idrauliche, elettriche e pneumatiche** dei precedenti riuniti Eurodent, senza necessità di opere murarie, risparmiando tempo e denaro. **Un attimo, e sei operativo.**

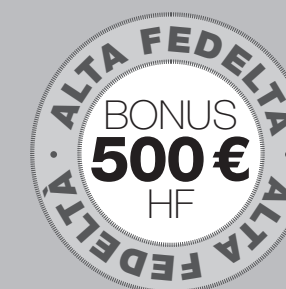

CONSOLLE ODONTOIATRA

- Regolazione indipendente della velocità e della potenza dei motori, degli ablatori e degli spray di tutti gli strumenti.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo anti retraction valve agli strumenti.
- **Display per il controllo di tutti i parametri degli strumenti in funzione delle proprie esigenze.**
- **Touch screen capacitivo per il controllo di:**
 - **Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa.**
 - **Accensione e spegnimento lampada scialitica.**
 - **Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati.**
 - **Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".**
 - **Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.**
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoletta portatray doppia su braccio articolato.

STRUMENTAZIONE

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina proporzionale a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore brushless EU33 a induzione con controllo di coppia e doppio led bianco e blu UV.
- Ablatore piezoelettrico TKD.

CONSOLLE ASSISTENTE

- Doppio braccio articolato e pantografato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
- Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa.
- Accensione e spegnimento lampada scialitica.
- Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Predisposizione per ulteriori 2 strumenti: siringa e lampada polimerizzante.

GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotante di 140° estraibile e autoclavabile.
- Fontanella riempimento bicchiere asportabile e autoclavabile.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido, completa di valvola per aspirazione centralizzata.
- Safespray.

POLTRONA AG04

- Poltrona elettromeccanica completa di braccio sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita-discesa della seduta, salita-discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezza antischiacciamento per base e spalliera.

PEDALIERA WIRELESS MULTIFUNZIONE

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Possibilità di personalizzare i comandi secondo le proprie esigenze.

LAMPADA SCIALITICA A LED MAIA

- Intensità luminosa 35000 lux, temperatura di colore 5000° K.
- Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Rotazione su 2 assi.



Garanzia
anni

3

IN OMAGGIO

LAMPADA A LED MAIA


La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.

- Intensità luminosa da 3.000 a 35.000 lux.
- Temperatura di colore 5.000° K.
- Dimensioni spot luminoso 85 x170 mm.
- Rotazione su 2 assi.



SAFESPRAY

Un contenitore pressurizzato che consente l'utilizzo di acqua distillata (eventualmente addizionata con igienizzanti) destinata agli spray di tutti gli strumenti della tavoletta medico e della siringa assistente.

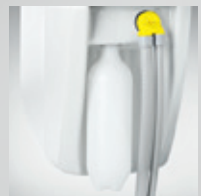

ABLATORE TKD

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico, piena compatibilità con la gamma di inserti EMS e Satelec. Il trasduttore in titanio del manipolo assicura elevata affidabilità e migliore resa in potenza. Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali.



8^{,00} €
giorno

VALORE RIUNITO
€ 23.990

SCONTO
- € 9.000

PREZZO FINALE
€ 14.990

AL MESE A SOLI
€ 238,42*

*Rata indicizzata su 72 canoni mensili.
Trasporto, montaggio e IVA esclusi.
Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Promozione valida fino al 31/12/2020

PERSONALIZZA IL TUO RIUNITO CON I NUOVI PACK IN OFFERTA (PAG. 14-15)

SU MISURA PER TE

Absolute raccoglie la grande tradizione di Eurodent e la spinge ancora oltre. È un riunito di nuova generazione, che sviluppa il concept di lavoro Eurodent con una grande attenzione ai dettagli e alla qualità lavorativa. È un riunito che ti permette di sfruttare al 100% le tue capacità e la tua esperienza. Puoi personalizzare tutte le configurazioni, adattandole al tuo modo di operare.





QUALITÀ SOTTO CONTROLLO

Con Absolute, nulla è lasciato al caso. L'eccezionale interfaccia di controllo ti permette di regolare tutti i parametri degli strumenti in funzione delle tue esigenze. Potrete per esempio adattare individualmente per ogni strumento la velocità o la potenza oppure la qualità e la quantità di spray, un controllo assoluto per una qualità di lavoro assoluta.

BASTA UN PEDALE

Controllare Absolute è un gioco. Con un solo pedale con tecnologia wireless gestisci strumentazione, poltrona, lampada e altre funzioni ausiliarie. Così le mani sono libere, per lavorare preciso e concentrato, evitando l'utilizzo di comandi manuali ed eliminando i rischi di infezione crociata.

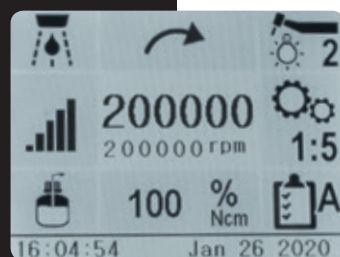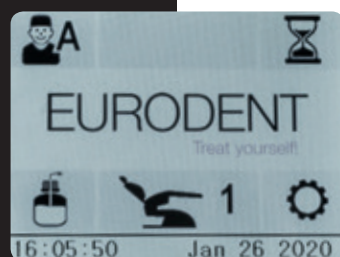

SICUREZZA E STABILITÀ ASSOLUTA

Absolute dispone di un capiente gruppo idrico a terra costruito con alluminio e acciaio inox con sportelli apribili: queste caratteristiche garantiscono la massima stabilità del riunito e del paziente e consentono di configurare il riunito con i diversi sistemi opzionali di disinfezione quali:

- Modulo per Sistema Disinfezione in continuo.

Con funzione che disconnette il circuito idrico del riunito dalla rete municipale tramite salto in aria in conformità alla norma europea EN 1717

- Sistema FLUSHING

Esegue il ricambio completo dell'acqua nelle condotte con un flusso temporizzato del liquido di alimentazione. Semplice e rapida sostituzione del liquido presente nel circuito. Risulta utile per eliminare il liquido stagnante nei condotti dopo pause di utilizzo, come ad inizio giornata lavorativa.

- Sistema automatico lavaggio circuiti aspirazione

- Filtro LGB ultrafiltrazione a 0,05m

Elimina totalmente le cariche batteriche nell'acqua di rete (legionella, pseudomonas, virus e batteri), blocca tutte le micro particelle superiori a 0,05 micron.

Un dispositivo essenziale a salvaguardia del paziente, del team odontoiatrico e di tutta la strumentazione del riunito.



CONSOLLE ODONTOIATRA

- Regolazione indipendente della velocità e della potenza dei motori, degli ablatori e degli spray di tutti gli strumenti.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo anti retraction valve agli strumenti.
- **Display per il controllo di tutti i parametri degli strumenti in funzione delle proprie esigenze.**
- **Touch screen capacitivo per il controllo di:**
 - **Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa.**
 - **Accensione e spegnimento lampada scialitica,**
 - **Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati.**
 - **Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".**
 - **Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.**
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoletta portatray singola su braccio articolato.

STRUMENTAZIONE

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore brushless EU33 a induzione con controllo di coppia e doppio led bianco e blu UV.
- Ablatore piezoelettrico TKD

CONSOLLE ASSISTENTE

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
- Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa.
- Accensione e spegnimento lampada scialitica,
- Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotante di 160° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido, completa di valvola per aspirazione centralizzata.
- Safespray

POLTRONA AG04

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita-discesa della seduta, salita-discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antisciacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit

PEDALIERA WIRELESS MULTIFUNZIONE

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Possibilità di personalizzare i comandi secondo le proprie esigenze.

LAMPADA SCIALITICA A LED MAIA

- Intensità luminosa 35000 lux,
- temperatura di colore 5000° K.
- Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Rotazione su 2 assi.



Garanzia
anni

3

IN OMAGGIO

LAMPADA A LED MAIA

La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.

- Intensità luminosa da 3.000 a 35.000 lux.
- Temperatura di colore 5.000° K.
- Dimensioni spot luminoso 85x170 mm.
- Rotazione su 2 assi.



SAFESPRAY

Un contenitore pressurizzato che consente l'utilizzo di acqua distillata (eventualmente addizionata con igienizzanti) destinata agli spray di tutti gli strumenti della tavoletta medico e della siringa assistente.



ABLATORE TKD

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico, piena compatibilità con la gamma di inserti EMS e Satelec. Il trasduttore in titanio del manipolo assicura elevata affidabilità e migliore resa in potenza. Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali.



7,⁰⁰
€
giorno

VALORE RIUNITO

€ 19.990

SCONTO

- € 8.000

PREZZO FINALE

€ 11.990

AL MESE A SOLI

€ 190,70*

*Rata indicizzata su 72 canoni mensili.
Trasporto, montaggio e IVA esclusi.
Fogli illustrativi, tassi e condizioni
presso l'ente erogante.

Promozione valida fino al 31/12/2020

PERSONALIZZA IL TUO RIUNITO CON I NUOVI PACK IN OFFERTA (PAG. 14-15)

TECNOLOGIA AL TUO SERVIZIO

Isotron è il nuovo riunito firmato Eurodent. Affidabile, innovativo e dal design accattivante, è lo strumento ideale per chi è attento ai dettagli e alla qualità del trattamento odontoiatrico. Con i comandi touch, puoi gestire e personalizzare molte funzioni, creando una perfetta interazione tra macchina e team odontoiatrico.



QUALITÀ SOTTO CONTROLLO

Con Isotron, nulla è lasciato al caso. L'eccezionale interfaccia di controllo ti permette di regolare tutti i parametri degli strumenti in funzione delle tue esigenze. Potrete per esempio adattare individualmente per ogni strumento la velocità o la potenza oppure la qualità e la quantità di spray, un controllo assoluto per una qualità di lavoro assoluta.


BASTA UN PEDALE

Controllare Isotron è un gioco. Con un solo pedale con tecnologia wireless gestisci strumentazione, poltrona, lampada e altre funzioni ausiliarie. Così le mani sono libere, per lavorare preciso e concentrato, evitando l'utilizzo di comandi manuali ed eliminando i rischi di infezione crociata.



CONSOLLE ASSISTENTE PLUS

Con doppio braccio articolato, si estende e si richiude per offrire ampi spazi all'assistente e garantire la massima praticità in ogni posizione di lavoro, garantendo sempre l'accessibilità ai comandi e agli strumenti in linea retta con l'operatore. Tramite la consolle si gestiscono tutte le funzioni della poltrona e del gruppo idrico: movimentazione della poltrona (con 4 posizioni memorizzabili), erogazione dell'acqua alla bacinella e al bicchiere, illuminazione. È predisposto con due canule d'aspirazione. I comandi della consolle sono sottomembrana, facilmente igienizzabili. La maniglia per la movimentazione del modulo è smontabile e autoclavabile.

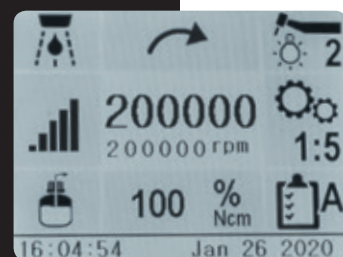

SEMPRE AL POSTO GIUSTO

Grazie a una bacinella rotante di 160°, e a una consolle assistente studiata ergonomicamente, si avrà a disposizione maggiore spazio operativo, agevolando il lavoro del team odontoiatrico.



CONSOLLE ODONTOIATRA

- Regolazione indipendente della velocità e della potenza dei motori, degli ablatori e degli spray di tutti gli strumenti.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo anti retraction valve agli strumenti.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa.
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati.
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
 - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoletta portatray singola su braccio articolato.

STRUMENTAZIONE

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico MC3 led.
- Ablatore piezoelettrico TKD.

CONSOLLE ASSISTENTE

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa.
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati.
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotante di 160° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.

POLTRONA AG04

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita-discesa della seduta, salita-discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antisciacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.

PEDALIERA MULTIFUNZIONE

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

LAMPADA SCIALITICA A LED MAIA

- Intensità luminosa 35000 lux, temperatura di colore 5000° K.
- Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Rotazione su 2 assi

IN OMAGGIO


LAMPADA A LED MAIA

La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.

- Intensità luminosa da 3.000 a 35.000 lux.
- Temperatura di colore 5.000° K.
- Dimensioni spot luminoso 85 x170 mm.
- Rotazione su 2 assi.

ABLATORE TKD

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico, piena compatibilità con la gamma di inserti EMS e Satelec. Il trasduttore in titanio del manipolo assicura elevata affidabilità e migliore resa in potenza. Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali.

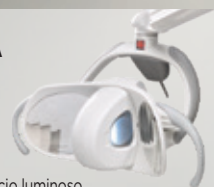

Garanzia
anni

3



6^{,00} €
giorno

VALORE RIUNITO
€ 17.990

SCONTO
- € 8.000

PREZZO FINALE
€ 9.990

AL MESE A SOLI
€ 166,63*

*Rata indicizzata su 72 canoni mensili.
Trasporto, montaggio e IVA esclusi.
Fogli illustrativi, tassi e condizioni
presso l'ente erogante.

PERSONALIZZA IL TUO RIUNITO CON I NUOVI PACK IN OFFERTA (PAG. 14-15)

Promozione valida fino al 31/12/2020

HAI SCELTO IL TUO RIUNITO EURODENT? ORA PERSONALIZZALO CON I NUOVI PACK CHE PREFERISCI!

PACK 1 TOP COMFORT

~~€ 1.500~~ € 999

COMFORT PER IL MEDICO E PER IL PAZIENTE: ESSENZIALI PER SALVAGUARDARE SALUTE E QUALITÀ LAVORATIVA



IMBOTTITURA CHIRURGICA: RELAX A MISURA DI PAZIENTE

L'imbottitura chirurgica, grazie alle caratteristiche del materiale utilizzato, aumenta il volume della superficie della poltrona, adattandosi alla corporatura del paziente e distribuendone uniformemente la pressione. Garantisce un corretto sostegno anatomico e un eccellente comfort, favorendo il rilassamento del paziente specialmente durante le sedute odontoiatriche più lunghe. Il paziente è tranquillo e rilassato, e per te è più semplice lavorare.




SGABELLO HARLEY: COMODITÀ A MISURA DI ODONTOIATRA

Lo sgabello Harley è un vero sollievo per chi deve lavorare ore ed ore in studio. Uno sgabello di qualità è il miglior alleato della tua salute. La seduta anatomica evita l'insorgere di problemi posturali, mantenendo la corretta geometria muscolo-scheletrica. Anche in caso d'interventi prolungati, il comfort è assicurato.

PACK 2 MULTIMEDIA

~~€ 2.100~~ € 1.599

COSTRUISCI UNA RELAZIONE TRA ODONTOIATRA E PAZIENTE, CON LA CONDIVISIONE E LA CONSAPEVOLEZZA DEI RISULTATI.

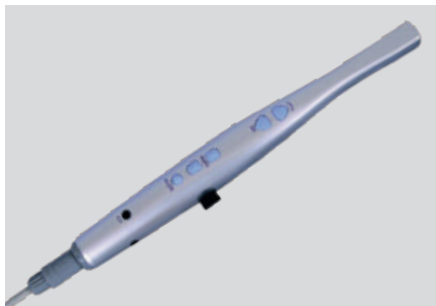

VIDEO CAMERA INTRAORALE ANALOGICA (montata lato monitor)

Sensore Cmos 1/4", uscita av, micro sd. comandi sul manipolo fronte: on/off/fermo immagine, quadranti (1, 4, 9), gestione pendrive: immagine successiva, immagine precedente, cancella immagine. comandi sul manipolo retro: on/off/fermo immagine, quadranti (1, 4, 9). illuminazione a 6 led bianchi. alimentatore 5v incluso. adattatore sd pendrive incluso. WiFi incluso.



MONITOR LCD LED, 18,5" 16:9 COMPLETO DI SUPPORTO FISSO CABLATO

Ingressi: vga/hdmi/av/usb per lettore multimediale, altoparlanti integrati, alimentatore 12v separato, telecomando. Vetro di protezione frontale. Supporto completo di ganasce regolabile da 42 a 50mm. Colore RAL 9010. Incluso nuovo kit per diametro palo lampada fino a 57mm.

PACK 3 TOP SAFE

~~€ 1.500~~ € 999

SISTEMA DI ULTRAFILTRAZIONE MOLECOLARE PER LA TOTALE ELIMINAZIONE DELLE CARICHE BATTERICHE E PER LA PREVENZIONE DELLA LEGIONELLA DALL' ACQUA DI RETE DEL RIUNITO ODONTOIATRICO



Eurodent, da sempre attenta e sensibile all'igiene e alla sicurezza nell'ambiente lavorativo, è la prima azienda che ti offre la possibilità di installare su tutti i riuniti il filtro LGB, un dispositivo di filtraggio progettato ad hoc per la prevenzione della legionella in Odontoiatria.

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Elimina totalmente le cariche batteriche e i virus nell'acqua di rete che alimenta il circuito idrico del riunito. Il filtro LGB è certificato dal Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica della Università di Parma, che ne ha validato anche la durata di massima efficienza in esercizio.
- Blocco totale di tutte le micro particelle superiori a 0,05 micron (sabbiolina, agglomerati di calcare, alghe e residui organici) presenti nell'acqua di rete, proteggendo le valvole antireflusso e gli strumenti rotanti da possibili occlusioni.
- La filtrazione LGB è certificata CE, NSF e TUV.
- Altro aspetto importante il dispositivo è dotato di

un filtro aggiuntivo a carbone attivo vegetale utile nella prevenzione della formazione delle alghe, nella deodorazione e nella deodorazione dell'acqua, nonché nell'eliminazione di tossine (codice ATC: A07BA01) antibiotici e agenti fungicidi.

- Il filtro è certificato anche per la pseudomonas aeruginosa.
- Ulteriore indice di sicurezza è costituito dall'indicazione di durata dei filtri che è stata certificata a 8000 litri in esercizio e ad 1 anno di lavoro.

Indice comprovato da organi istituzionali riconosciuti.

LGB, ti protegge in tutti i sensi.


Dal punto di vista legale, perché ti solleva da ogni responsabilità. E dal punto di vista igienico, perché mette al riparo il team odontoiatrico e il paziente dal rischio di contaminazione. Una doppia sicurezza firmata Eurodent.

PACK 4 TOP PERFORMANCE

ABSOLUTE ISOTRON

~~€ 1.100~~ € 466

MICROMOTORE BRUSHLESS A INDUZIONE CON CONTROLLO DI COPPIA E DOPPIO LED BIANCO E BLU UV

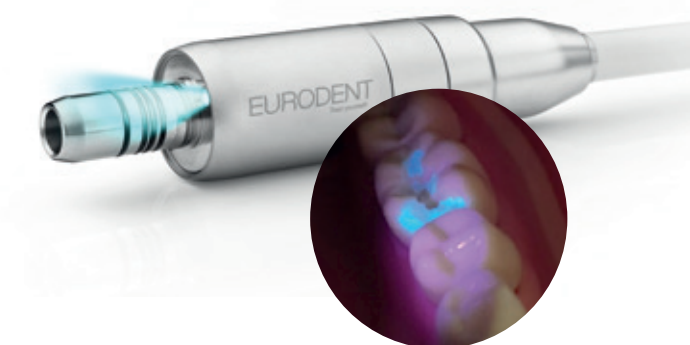

VANTAGGI:

- 1°) rimozione di vecchi restauri in composito, permette di capire se la resina è stata completamente rimossa durante la perforazione;
- 2°) strumento di rilevamento della carie durante la perforazione;
- 3°) finitura e lucidatura di compositi e facilitazione della rimozione dei cementi adesivi
- 4°) controllo post-operatorio dei margini di riempimento del composito.

MADE IN SWISS
GARANZIA 3 ANNI

Micromotore **EURODENT BRUSHLESS MO-93-2LFA** per endodonzia e chirurgia: velocità di rotazione compresa fra 80 e 40.000 giri/min. Torque: 3,5 Nw/cm.

SE ACQUISTI DUE PACK A SCELTA*, IL PACK PERFORMANCE È IN OMAGGIO!

* PACK 1, PACK 2, PACK 3

ISOSAN

IL VAPORE CHE SANIFICA AL 100%



ISOSAN è un apparecchio per la sanificazione di attrezzature, superfici e ampie aree, che combina vapore saturo secco e disinfettante*. Capace di raggiungere una temperatura del vapore fino a 165°C, è **in grado di uccidere il 99,999% di virus, germi, batteri, funghi e spore**. Una nuvola avvolge le superfici da disinfettare, che asciugheranno rapidamente. **Totalmente made in Italy**, lavora con acqua del rubinetto che viene aggiunta nel serbatoio non pressurizzato permettendo quindi cicli di igiene in continuo senza interruzioni.

*VAPORE COMBINATO AL DISINFETTANTE

Montando l'accessorio "nebulizzatore a vapore", il vapore si combina con il detergente permettendo di nebulizzare un getto sanificante. A contatto con le superfici, il gas si raffredda, condensa in micro gocce disinfettanti, e crea un film sanificante e protettivo che garantisce **l'eliminazione immediata, profonda, duratura di virus, batteri e altri patogeni**.



PREZZO
€ 3.190

SCONTO
- € 1.500

PREZZO FINALE
€ 1.690
COMPRESIVO DI ACCESSORI

APPROFITTA DELL' AGEVOLAZIONE

Super ammortamento credito di imposta 6% / 5 anni per beni strumentali.

Vantaggi dell'agevolazione:

si utilizza in tempo minore (5 anni); il credito si compensa, anche in assenza di utili, con qualsiasi contributo (INPS, IVA, contributi dipendenti).

Per maggiori informazioni, consulta il tuo commercialista!

EURODENT[®]

Treat yourself!

Via Rossini, 26 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)

Tel. 051 780465 - Fax 051 781625

Responsabile commerciale:

Sig. ra Giovanna Dozio - Cell. 393 8875521



eurodent@eurodent.it
www.eurodent.it