# EURODENT®





# LOS MEJORES PROFESIONALES ELIGEN EURODENT

Eurodent es el gran protagonista del sector odontológico.

Desde hace más de 60 años, proyecta y realiza equipos dentales de calidad, abriendo nuevos caminos con productos ricos en innovación y estilo. Son de Eurodent el primer sillón dental de pantógrafo y los primeros instrumentos con brazos equilibrados.

También lo es Isotron, creado por Giugiaro Design, que recibió el Compás de Oro, uno de los más prestigiosos premios internacionales de diseño.

Los equipos dentales Eurodent son 100 % made in Italy,

fiables, ergonómicos y extremadamente intuitivos.

Son elegidos por los mejores profesionales en decenas de países.

Están listos para acompañar su trabajo con calidad y fiabilidad.



# **RELAX = CONFIANZA**

Eurodent sabe la importancia que tiene para mí que los pacientes estén relajados y satisfechos durante el tratamiento. Por este motivo ha creado este equipo dental, seguro y confortable, que me ayuda a conquistar la confianza de mis pacientes.

Dr. Maurice Soudry Marsella, Francia

# EURODENT

# TODO PERFECTAMENTE EFICIENTE

**Eurodent Care** es la división de Eurodent dedicada a todos los profesionales que desean **mantener perfectamente eficiente** su equipo dental Eurodent classic, utilizando solo repuestos originales y técnicos autorizados.

# CLINIC: TODO BAJO CONTROL

Los especialistas Eurodent pueden realizar un control completo de su equipo dental Eurodent, verificando el estado de cada componente:

- 1 Control de los dispositivos de seguridad
- 2 Control de los teclados de las consolas
- 3 Control de la lámpara
- 4 Control del filtro de agua
- 5 Control del filtro de aire
- 6 Control del filtro del silenciador de las turbinas
- 7 Control del filtro y de los tubos de aspiración
- 8 Control de la conexión de las cánulas
- 9 Control del Canister
- 10 Control de la desinfección UV

Al final del control recibirá un presupuesto por los eventuales trabajos de mantenimiento.

Llámenos ya para fijar una cita: mobile: +34 627 985824 - j.alvarez@eurodent.it



# HIGH FIDELITY: LA FIDELIDAD COMO PREMIO

Por el contrario, si desea sustituir su equipo dental Eurodent classic con otro de última generación, se le otorgará una bonificación de "alta fidelidad" de 500 euros sobre los precios que encontrará en las próximas páginas. Una oferta aún más conveniente, ya que le permite ahorrar también en la instalación. En efecto, todos los nuevos equipos dentales Eurodent están proyectados para ser instalados con las mismas conexiones hidráulicas, eléctricas y neumáticas que los equipos dentales Eurodent anteriores, sin necesidad de obras de albañilería, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero. Solo un instante y puede retomar su actividad.





# **ABSOLUTE EURODENT**

## BANDEJA DEL ODONTÓLOGO

- Regulación independiente de la velocidad y de la potencia de los motores, de los ultrasonidos y de los sprays de todos los instrumentos.
- Sistema de seguridad para la selección automática de los instrumentos.
- Dispositivo Anti Retraction Valve para los instrumentos. - Display para el control de todos los parámetros de
- los instrumentos, en función de sus necesidades.
- Pantalla táctil con capacidad para el control de: - Movimientos del sillón y activación de sus programas.
- Encendido y apagado de la lámpara cialítica. Llenado del vaso y lavado de la escupidera
- temporizados. - Activacíon de los programas automáticos de escupidera y de la última posicíon.
- Control de todas las funciones de los instrumentos.
- Bandeja para instrumentos con protección e silicona y manijas de desplazamiento desmontables y
- Bandeja portatray doble con brazo articulado.

#### INSTRUMENTOS

autoclavables.

- Módulo con jeringa de aire agua spray.
- Módulo para turbina proporcional de fibra óptica.
- Módulo con micromotor sin escobillas EU33 de inducción
- con control de torque y doble led blanco y azul UV.
- Módulo ultrasonidos TKD.

# BANDEJA DEL ASISTENTE

- Doble brazo articulado.
- Dos cánulas de aspiración quirúrgica.
- Posición para instrumento adicional.
- Teclado de membrana para el control de: - Movimientos del sillón y activación de sus programas.
- Encendido y apagado de la lámpara cialítica.
- Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados.
- Activación de los programas automáticos de enjuague y última posición.
- Predisposición para 2 instrumentos adicionales: jeringa y lámpara polimerizadora.

#### **GRUPO HÍDRICO**

- Escupidera de cerámica con movimiento de 140°.
- extraíble y autoclavable.
- Grifos para el llenado del vaso y lavado de la escupidera desmontables y autoclavables.
- Aspiración prevista para un motor de anillo húmedo o líquido, con válvula de aspiración centralizada.
- Safespray

# SILLÓN AG04E

- Sillón electromecánico con apoya brazo izquierdo blanco. - 4 movimientos guiados (subida/bajada del asiento,
- subida/bajada del respaldo).
- 4 posiciones programables.
- Trendelenburg sincronizado con el respaldo.
- Apoyacabezas con doble articulación.
- Dispositivos de seguridad antiaplastamiento en la base y en el espaldar.

# PEDAL INALÁMBRICO MULTIFUNCIÓN

- Activación y regulación de la velocidad o potencia de los instrumentos.
- Activación de sprays y chip air.
- Activación de los movimientos del sillón y de sus programas.
- Activación de los programas automáticos de escupidera y última posición. - Posibilidad de personalizar los mandos en función de
- sus necesidades.

# LÁMPARA MAIA LED

- Intensidad luminosa 35000 lx, temperatura de color 5000° K.
- Manijas desmontables y autoclavables.
- Rotación en 2 ejes.







DESDE

# ABSOLUTE EURODENT

# ABSOLUTE: HECHO A SU MEDIDA

Absolute, recoge la gran herencia de Eurodent para llevarla más alla. Es un sillón odontologico de nueva generación, que desarrolla el concepto de trabajo de Eurodent, con una gran atención a los detalles y a la calidad en el trabajo. Este sillón odontologico le permite disfrutar al 100% de toda su capacidad y experiencia. Puede personalizar todas las configuraciones, adaptandolas a su modo de trabajo.




#### CALIDAD BAJO CONTROL

Con Absolute, nada queda al azar. El excepcional teclado de control permite regular todos los parámetros de los instrumentos en función de las necesidades. Por ejemplo, podrá adaptar la velocidad o la potencia de cada instrumento, o la calidad y la cantidad de cada spray: un control absoluto para una calidad de trabajo absoluta.

## ES SUFICIENTE UN PEDAL

Controlar el equipo dental Absolute es casi un juego. Con un solo pedal, puede controlar los instrumentos, el sillón, la lámpara y otras funciones auxiliares. De esta forma, las manos quedan libres para trabajar con la mayor precisión y concentración, evitando el uso de mandos manuales y eliminando los riesgos de infección cruzada. Disponible en versión con o sin cable.



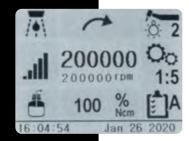





## SEGURIDAD Y ESTABILIDAD ABSOLUTA

Absolute dispone de un grupo hídrico a suelo de grandes dimensiones, construido en aluminio y acero inoxidable, con puertas abatibles: estas características garantizan la máxima estabilidad del equipo dental y del paciente, y permiten configurar el equipo dental con los diferentes sistemas opcionales de desinfección como, por ejemplo:

# - Módulo para sistema de desinfección continua.

Cuenta con una función que desconecta el circuito hídrico del equipo dental de la red general mediante salto en el aire, en conformidad con la norma europea EN 1717.

#### - Sistema FLUSHING

Realiza el recambio completo del agua en los conductos, con un flujo temporizado del líquido de alimentación. Simple y rápida sustitución del líquido presente en el circuito. Resulta útil para eliminar el líquido estancado en los conductos, después de las interrupciones del uso y al comienzo de la jornada laboral.

# - Sistema automático de lavado de los circuitos de aspiración

# - Filtro LGB de ultrafiltración a 0,05 m

Elimina totalmente las cargas bacterianas en el agua de red (Legionella, Pseudomonas, virus y bacterias) y bloquea todas las micropartículas de más de 0,05 micras. Se trata de un dispositivo esencial para la protección del paciente, del personal odontológico y de todo el instrumental del equipo dental.



# **ISOTRON** EURODENT

## BANDEJA DEL ODONTÓLOGO

- Regulación independiente de la velocidad y de la potencia de los motores, de los ultrasonidos y de los sprays de todos los instrumentos.
- Sistema de seguridad para la selección automática de los instrumentos.
- Dispositivo Anti Retraction Valve para los instrumentos. - Display para el control de todos los parámetros de
- los instrumentos, en función de sus necesidades.
- Pantalla táctil con capacidad para el control de: - Movimientos del sillón y activación de sus programas.
- Encendido y apagado de la lámpara cialítica. Llenado del vaso y lavado de la escupidera
- temporizados. Activación de los programas automáticos de escupidera y de la última posición.
- Control de todas las funciones de los instrumentos.
- Bandeja para instrumentos con protección e silicona y manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
- Bandeja portatray individual con brazo articulado.

#### INSTRUMENTOS

- Módulo con jeringa de aire agua spray.
- Módulo para turbina de fibra óptica.
- Módulo con micromotor sin escobillas EU33 de inducción con control de torque y doble led blanco y azul UV.
- Módulo ultrasonidos TKD.

# **BANDEJA DEL ASISTENTE**

- Doble brazo articulado.
- Dos cánulas de aspiración quirúrgica.
- Alojamiento para instrumento adicional.
- Teclado de membrana para el control de:
- Movimientos del sillón y activación de sus programas.
- Encendido y apagado de la lámpara cialítica. - Llenado del vaso y lavado de la escupidera
- temporizados.
- Activación de los programas automáticos de enjuague y última posición.
- Manija de desplazamiento desmontable y autoclavable.

# GRUPO HÍDRICO

- Escupidera de cerámica con movimiento de 160°, extraíble y autoclavable.
- Grifos para el llenado del vaso y lavado de la escupidera desmontables y autoclavables.
- Aspiración prevista para un motor de anillo húmedo o líquido, con válvula de aspiración centralizada.
- Safespray.

# SILLÓN AG04E

- Sillón electromecánico con apoya brazo izquierdo blanco. - 4 movimientos guiados (subida/bajada del asiento,
- subida/bajada del respaldo).
- 4 posiciones programables.
- Trendelenburg sincronizado con el respaldo.
- Apoyacabezas con doble articulación.
- Dispositivos de seguridad antiaplastamiento en la
- base y en el espaldar.
- Kit de estabilidad.

# PEDAL INALÁMBRICO MULTIFUNCIÓN

- Activación y regulación de la velocidad o potencia de los instrumentos.
- Activación de sprays y chip air.
- Activación de los movimientos del sillón y de sus programas.
- Activación de los programas automáticos de escupidera y última posición. - Posibilidad de personalizar los mandos en función de
- sus necesidades.

# LÁMPARA MAIA LED

- Intensidad luminosa 35000 lx, temperatura de color 5000° K.
- Manijas desmontables y autoclavables.







# ISOTRON EURODENT

# LA TECNOLOGIA A SU SERVICIO

Isotron es el nuevo equipo con el sello Eurodent. Es fiable, innovador y tiene un diseño elegante, lo que hace que sea el instrumento ideal para los que prestan atención a los detalles y a la calidad de los tratamientos odontológicos. Gracias a los controles táctiles, puede gestionar y personalizar muchas funciones, lo que permite una perfecta integración entre la máquina y el equipo odontológico.



#### CALIDAD BAJO CONTROL

Con Isotron, nada queda al azar. La excepcional interfaz de control permite regular todos los parámetros de los instrumentos en función de las necesidades. Por ejemplo, podrá adaptar la velocidad o la potencia de cada instrumento, o la calidad y la cantidad de cada spray: un control absoluto para una calidad de trabajo absoluta.

#### ES SUFICIENTE UN PEDAL

Controlar el equipo dental Isotron es casi un juego. Con un solo pedal, puede controlar los instrumentos, el sillón, la lámpara y otras funciones auxiliares. De esta forma, las manos quedan libres para trabajar con la mayor precisión y concentración, evitando el uso de mandos manuales y eliminando los riesgos de infección cruzada. Disponible en versión con o sin cable.




# CONSOLA DEL ASISTENTE PLUS

El doble brazo articulado, se extiende y se cierra para ofrecer al asistente un amplio espacio y la máxima practicidad en cualquier posición de trabajo, garantizando siempre la accesibilidad a los mandos y a los instrumentos alineados con el operador.

A través de la consola se controlan todas las funciones del sillón dental y del grupo hídrico: movimiento del sillón dental (con 4 posiciones memorizables), distribución de agua para la escupidera y para el vaso, iluminación. Están previstas dos cánulas de aspiración. Los mandos de la consola son de membrana, fácilmente higienizables.

La manija para el desplazamiento del módulo es desmontable y autoclavable.



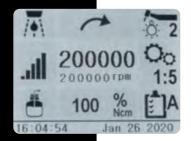







# **ISOPLUS** EURODENT

## BANDEJA DEL ODONTÓLOGO

- Regulación independiente de la velocidad y de la potencia de los motores, de los ultrasonidos y de los sprays de todos los instrumentos.
- Sistema de seguridad para la selección automática de los instrumentos.
- Dispositivo Anti Retraction Valve (válvula
- antirretracción) para los instrumentos. - Teclado de membrana para el control de:
- Movimientos del sillón y activación de sus programas.
- Encendido y apagado de la lámpara cialítica.
- Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados.
- Activación de los programas automáticos de escupidera y de la última posicíon.
- Control de todas las funciones de los instrumentos.
- Bandeja para instrumentos con protección de silicona y manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
- Bandeja portatray individual con brazo articulado.

#### INSTRUMENTOS

- Módulo con jeringa de aire agua spray.
- Módulo para turbina de fibra óptica.
- Módulo con micromotor eléctrico MC3 LED.
- Módulo ultrasonidos TKD.

#### BANDEJA DEL ASISTENTE

- Doble brazo articulado.
- Dos cánulas de aspiración quirúrgica.
- Posición para instrumento adicional.
- Teclado de membrana para el control de:
- Movimientos del sillón y activación de sus programas.
- Encendido y apagado de la lámpara cialítica.
- Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados.
- Activacíon de los programas automáticos de escupidera y de la última posicíon.
- Manija de desplazamiento desmontable y autoclavable.

#### **GRUPO HÍDRICO**

- Escupidera de cerámica con movimiento de 160°.
- extraíble y autoclavable. - Grifos para el llenado del vaso y lavado de la
- escupidera desmontables y autoclavables.
- Aspiración prevista para un motor de anillo húmedo o líquido.

# SILLÓN AG04E

- Sillón electromecánico con apoya brazo izquierdo
- 4 movimientos guiados (subida/bajada del asiento, ubida/bajada del respaldo).
- 4 posiciones programables.
- Trendelenburg sincronizado con el respaldo.
- Apoyacabezas con doble articulación.
- Dispositivos de seguridad antiaplastamiento en la base y en el espaldar.
- Kit de estabilidad.

#### PEDAL MULTIFUNCIÓN

- Activación y regulación de la velocidad o potencia de los instrumentos.
- Activación de sprays y chip air.
- Activación de los movimientos del sillón y de sus programas.
- Activación de los programas automáticos de escupidera y última posición.

# LÁMPARA MAIA LED

- Intensidad luminosa 35000 lx, temperatura de color 5000° K.
- Manijas desmontables y autoclavables.
- Rotación en 2 ejes.







# ¿HA ELEGIDO SU EQUI PO DENTAL EURODENT?


IAHORA PERSONALÍCELO CON LOS NUE VOS PAQUETES DE SU PREFERENCIA!

**PAQUETE 1** MÁXIMO CONFORT

€. 999


**PAQUETE 3** TOP SAFE

CONFORT PARA EL MÉDICO Y PARA EL PACIENTE: ESENCIALES PARA PROTEGER LA SALUD Y CALIDAD DEL TRABAJO.

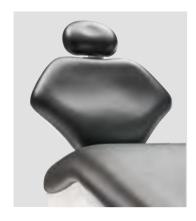

#### ACOLCHADO QUIRÚRGICO: RELAX A LA MEDIDA DEL PACIENTE

Gracias a las características del material utilizado, el acolchado quirúrgico aumenta el volumen y la superficie del asiento, adaptándose al cuerpo del paciente y distribuyendo uniformemente la presión. Esto garantiza siempre un apoyo anatómico y una gran comodidad, favoreciendo la relajación del paciente, especialmente durante las sesiones más prolongadas. El paciente permanece tranquilo y relajado, facilitando su trabajo.

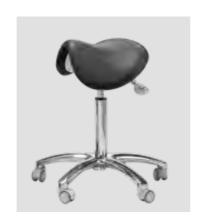

#### TABURETE HARLEY: COMODIDAD A LA MEDIDA DEL ODONTÓLOGO

consultorio. Un taburete de calidad es el meior aliado para su salud. El asiento anatómico evita los problemas posturales, manteniendo la correcta geometría musculoesquelética. El confort está garantizado, incluso en caso de intervenciones prolongadas.

El taburete Harley es un verdadero alivio para quienes tienen que trabajar horas y horas en el

# **PAQUETE 2 MULTIMEDIA**



CONSTRUYA UNA RELACIÓN ENTRE EL ODONTÓLOGO Y EL PACIENTE, COMPARTIENDO EL TRABAJO Y CON PLENA CONCIENCIA DE LOS RESULTADOS.



#### CÁMARA DE VÍDEO INTRAORAL ANALÓGICA (montada en el lado del monitor)

Sensor Cmos 1/4", salida AV, microtarjeta SD. Mandos en el mango frontal: on/off/imagen fija, cuadrantes (1, 4, 9), gestión de memoria USB: imagen siguiente, imagen anterior, cancelar imagen. Mandos en el mango posterior: on/off/imagen fija, cuadrantes (1, 4, 9). Iluminación con 6 leds blancos. Alimentador 5V incluido. Adaptador SD memoria USB incluido. Wifi incluido.



# MONITOR LCD LED, 18,5" 16:9 CON SOPORTE FIJO CABLEADO

Entradas: VGA/HDMI/AV/USB para lector multimedia, altavoces integrados, alimentador 12V separado, control remoto. Vidrio de protección frontal. Soporte con mordaza regulable de 42 a 50 mm. Color RAL 9010. Incluido nuevo kit para diámetro varilla lámpara hasta 57 mm.

# SISTEMA DE ULTRAFILTRACIÓN MOLECULAR PARA LA ELIMINACIÓN TOTAL DE LA CARGA BACTERIANA DEL AGUA DE RED DEL EQUIPO DENTAL.



Eurodent, desde siempre atenta y sensible a la higiene y a la seguridad en el ambiente de trabajo, es la primera empresa que le ofrece la posibilidad de instalar en todos los equipos dentales el filtro LGB, un dispositivo de ultrafiltración especialmente proyectado para la prevención de la Legionella en el campo de la odontología.

#### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Elimina totalmente la carga bacteriana y los virus presentes en el agua de red que alimenta el circuito hídrico del equipo dental. El filtro LGB está certificado por el Departamento de Higiene y Salud Pública de la Universidad de Parma, que también ha certificado la duración de máxima eficiencia de funcionamiento.
- Bloqueo total de todas las micropartículas superiores a 0.05 micras (arenilla, aglomerados calcáreos, algas v residuos orgánicos) presentes en el agua de red. protegiendo las válvulas de retención y los instrumentos giratorios de posibles oclusiones. La filtración LGB cuenta con certificación CE, NSF y TUV.
- · Otro aspecto importante es que el dispositivo está dotado de un filtro adicional de carbón activo vegetal, útil para prevenir la formación de algas, para la desodorización y la decloración del agua, y para la eliminación de toxinas (código ATC: A07BA01) antibióticos y agentes fungicidas.
- El filtro también está certificado para la Pseudomonas aeruginosa.
- Otro elemento de seguridad está constituido por la indicación de duración de los filtros, certificada para 8000 litros en funcionamiento y 1 año de trabajo Indice comprobado por instituciones reconocidas.

LGB, vlo protege en todos los sentidos.

Desde el punto de vista legal, ya que lo exime de toda responsabilidad. y desde el punto de vista higiénico, ya que protege al personal odontológico y al paciente del riesgo de contaminación. una doble seguridad firmada

**PAQUETE 4** MÁXIMAS PRESTACIONES **ABSOLUTE** ISOTRON



€. 466

# MICROMOTOR SIN ESCOBILLAS DE INDUCCIÓN CON CONTROL DE PAR Y DOBLE LED BLANCO Y AZUL UV



Micromotor EURODENT SIN ESCOBILLAS MO-93-2LFA para endodoncia y cirugía: velocidad de rotación comprendida entre 80 y 40.000 rpm.








- 1°) Extracción de viejas reparaciones de compuesto; permite saber si la resina ha sido completamente extraída durante la perforación;
- 2°) Instrumento de detección de caries durante la perforación;
- 3°) Acabado y pulido de compuestos; facilita la extracción de cementos adhesivos:
- 4°) Control posoperatorio de los márgenes de llenado del compuesto.

**MADE IN SWISS 3 AÑOS DE GARANTÍA** 

ISI COMPRA DOS PA QUETES A ELECCIÓN\*, EL PAQUETE PERFOR MANCE VA DE REGALO!

\* PAQUETE 1, 2, 3

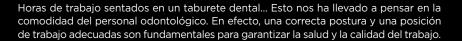







El asiento anatómico y el movimiento sincronizado del espaldar permiten al odontólogo sentarse en la posición más cómoda y correcta.



\*Configuración del taburete sin apoyapiés



# **ASSIST**

El asiento circular y el espaldar-apoya brazo semicircular permiten al asistente sentarse cómodamente, manteniendo una máxima agilidad de trabajo.



\*Configuración del taburete sin apoyapiés



# **HARLEY**

Similar en sus formas al asiento de una motocicleta, permite equilibrar perfectamente el peso sobre la columna vertebral y asumir una posición que reduce al mínimo el esfuerzo de los ligamentos y as articulaciones.



\*Configuración del taburete sin apoyapiés

# ¿DEBE PROYECTAR SU NUEVA CLÍNICA?

Gracias a sus especialistas distribuidos en el territorio, Eurodent puede aconsejarle sobre todo lo que necesita, proyectar y proporcionarle su nueva clínica completa, basada en la filosofía Eurodent - que garantiza la mejor ergonomía, un flujo de trabajo ideal y una imagen única y distintiva -, además de ocuparse del mantenimiento programado.

iContáctenos para más información!



# EURODENT

reat vourself!

Via Rossini, 26 40055 Villanova di Castenaso (BO), Italy Tel. +39 051 780465 - Fax +39 051 781625 eurodent@eurodent.it

Delegado Comercial España: Sig. ra Giovanna Dozio - Cell. +39 393 8875521 mail: g.dozio@eurodent.it

www.eurodent.it

Transporte montaie e IVA excluidos **Promoción válida hasta el 31/12/2020**