

# EURODENT

Aprile 2021

Treat yourself!

## **APPROFITTA**

*degli **sconti del 50%**  
su tutti i riuniti  
e degli straordinari  
**incentivi fiscali 2021***

- ***beni strumentali 4.0 con  
credito d'imposta del 50%***
- ***credito d'imposta del 10%***

**NOVITÀ**  
ISO/OS, lo studio di  
chirurgia orale

**NOVITÀ**  
ISOFLEX, il riunito dentale  
con ergonomia BESPOKE

# ISO/OS: IL TUO STUDIO CHIRURGICO INTEGRATO

**NOVITÀ**




**ISOCART:**

Dotato di 5 vani strumenti, può essere equipaggiato in base alle esigenze del professionista. Consente l'utilizzo di acqua distillata destinata agli spray degli strumenti.



**EDGE:**

Poltrona chirurgica azionata da 4 attuatori lineari tramite il comando a pedale wireless multifunzione. Con sistema trendelenburg e rail laterali.

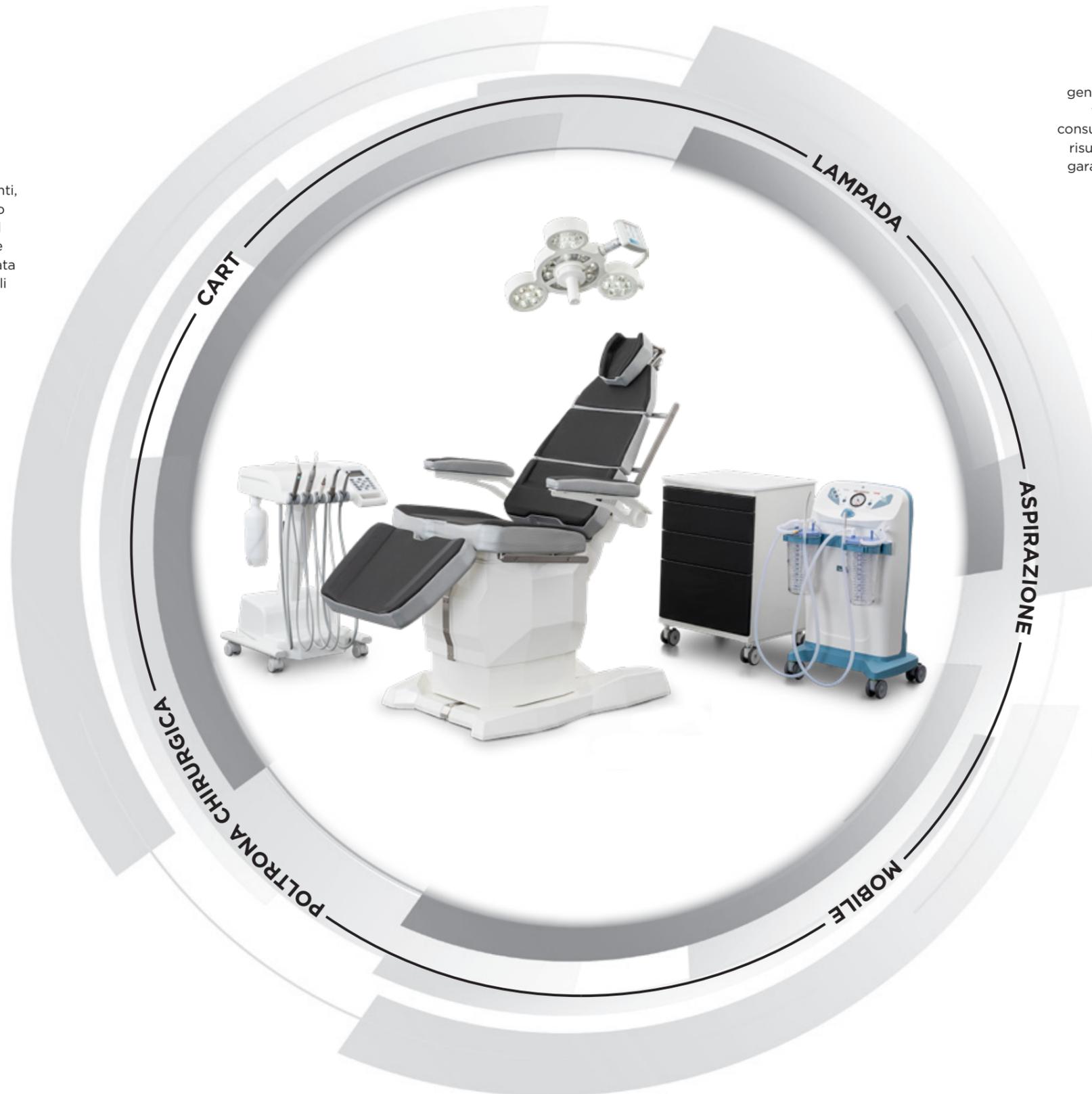

Lampada LED di ultima generazione che garantisce luce fredda, lunga durata e basso consumo energetico. L'area visiva risulta illuminata in modo ideale garantendo ottime condizioni di lavoro e di confort.



Un'aspirazione selettiva e precisa del sangue, dei tessuti e dei frammenti ossei. Dotato di doppio serbatoio, per assicurare più continuità lavorativa e zero fermi macchina.



Il mobile diventa elemento di organizzazione, ordine ed efficienza, garantendo una disponibilità immediata della strumentazione.



**Un progetto ambizioso, che Eurodent mette a disposizione del professionista che esige gli strumenti e i mezzi migliori nell'ambito della chirurgia orale.**

# ISOFLEX: L'ERGONOMIA A MISURA DI PROFESSIONISTA

**NOVITÀ**



**ISOFLEX, un concept di lavoro configurabile alle diverse discipline odontoiatriche e alle specifiche scuole di lavoro di ogni professionista.**

**Con ISOFLEX ottieni uno studio visivamente più leggero e rilassante e maggiormente tranquillizzante per il paziente, guadagnando inoltre più spazio operativo, risultando più facilmente igienizzabile con minor tempo e con più sicurezza per tutti.**

**ISOFLEX, ergonomia BESPOKE.**

**A PARTIRE DA**

**€ 4.945**

# EURODENT®

Treat yourself!

## RIUNITO ISOPLUS



GARANZIA 3 ANNI  
**3**  
GARANZIA 3 ANNI

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.

### PROMO ESSENTIAL

#### CONSOLE ODONTOIATRA

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
  - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
  - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
  - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
  - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
  - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoleta portatray singolo su braccio articolato.

#### STRUMENTAZIONE

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico ad induzione EU033.
- Ablatore a Led P-E.

#### CONSOLE ASSISTENTE

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
  - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
  - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
  - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
  - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

#### GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.

#### POLTRONA AGO4

- Poltrona elettromeccanica completa di braccio sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezza antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.

#### PEDALIERA MULTIFUNZIONE

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

#### LAMPADA SCIALITICA A LED EU MAIA

- Intensità luminosa 35000 lux, temperatura di colore 5000° K.
- Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Rotazione su 2 assi.

APPROFITTA

SCONTO

**50%**

+

INCENTIVI  
FISCALI

#### LAMPADA A LED EU MAIA

- La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.
- Intensità luminosa da 3.000 a 35.000 lux.
  - Temperatura di colore 5.000° K.
  - Dimensioni spot luminoso 85 x170 mm.
  - Rotazione su 2 assi.
  - Regolazione dell'intensità luminosa.
  - Con parabola riflettente.
  - Maniglie smontabili e autoclavabili.



VALORE  
COMMERCIALE  
**€ 1.800**

**IN OMAGGIO  
CON L'OFFERTA**

#### ABLATORE A LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS.



Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE  
COMMERCIALE  
**€ 1.300**

**IN OMAGGIO  
CON L'OFFERTA**

#### MOTORE INDUZIONE EU033

Micromotore ad induzione EU033 per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.



Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min. Torque : 3,5 Nw/cm.

MADE IN SWISS  
GARANZIA 3 ANNI

VALORE  
COMMERCIALE  
**€ 2.324**

**IN OMAGGIO  
CON L'OFFERTA**

A SOLI  
AL MESE **€ 172,98\***

\*Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Promozione valida fino al 30/06/2021

VALORE  
RIUNITO **€ 19.998**

**-50% SCONTO**

PREZZO  
SCONTATO **€ 9.999**

**-10% CREDITO D'IMPOSTA  
per professionisti ed srl**

COSTO  
REALE **€ 8.999**

# EURODENT®

Treat yourself!

## RIUNITO ISOPLUS



Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.



### IMBOTTITURA CHIRURGICA

Grazie alle caratteristiche del materiale utilizzato, aumenta il volume della superficie della poltrona, adattandosi alla corporatura del paziente e distribuendone uniformemente la pressione.



VALORE COMMERCIALE  
**€ 880**

**IN OMAGGIO CON L'OFFERTA**

### LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE EU-H

Lampada fotopolimerizzante EU-H con due programmi (ortodontico e standard) con potenze regolabili da 1000 a 1800 mW/cm<sup>2</sup> e lunghezza d'onda da 420 nm a 480 nm



VALORE COMMERCIALE  
**€ 600**

**IN OMAGGIO CON L'OFFERTA**

### LAMPADA A LED EU MAIA

La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.

- Intensità luminosa da 3.000 a 35.000 lux.
- Temperatura di colore 5.000° K.
- Dimensioni spot luminoso 85 x 170 mm.
- Rotazione su 2 assi.
- Regolazione dell'intensità luminosa.
- Con parabola riflettente.
- Maniglie smontabili e autoclavabili.




VALORE COMMERCIALE  
**€ 1.800**

**IN OMAGGIO CON L'OFFERTA**

### ABLATORE A LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS.

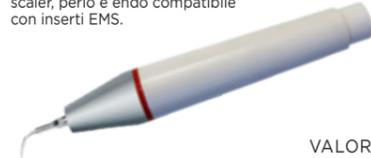

Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE  
**€ 1.300**

**IN OMAGGIO CON L'OFFERTA**

### MOTORE INDUZIONE EU033

Micromotore ad induzione EU033 per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.



Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min. Torque : 3,5 Nw/cm.

MADE IN SWISS  
GARANZIA 3 ANNI

VALORE COMMERCIALE  
**€ 2.324**

**IN OMAGGIO CON L'OFFERTA**

### SAFESPRAY

Un contenitore pressurizzato che consente l'utilizzo di acqua distillata (eventualmente addizionata con igienizzanti) destinata agli spray di tutti gli strumenti della tavoletta medico e della siringa assistente.



VALORE COMMERCIALE  
**€ 382**

**IN OMAGGIO CON L'OFFERTA**

APPROFITTA

SCONTO

# 50%

+  
INCENTIVI FISCALI

## PROMO MUST

### CONSOLLE ODONTOIATRA

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
  - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
  - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
  - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
  - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
  - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoletta portatray singolo su braccio articolato.

### STRUMENTAZIONE

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico ad induzione EU033.
- Ablatore a Led P-E.
- Lampada fotopolimerizzante EU-H.

### CONSOLLE ASSISTENTE

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
  - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
  - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
  - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
  - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

### GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.
- Safespray

### POLTRONA AGO4

- Poltrona elettromeccanica completa di braccio sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.
- Imbottitura chirurgica.

### PEDALIERA MULTIFUNZIONE

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

### LAMPADA SCIALITICA A LED EU MAIA

- Intensità luminosa 35000 lux , temperatura di colore 5000° K.
- Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Rotazione su 2 assi.

VALORE RIUNITO € **22.798**

**-50% SCONTO**

PREZZO SCONTATO € **11.399**

**-10% CREDITO D'IMPOSTA per professionisti ed srl**

COSTO REALE € **10.259**

A SOLI AL MESE € **193,78\***

\*Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Promozione valida fino al 30/06/2021



Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.

**PROMO ADVANCED**

**CONSOLLE ODONTOIATRA**

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- **Display per il controllo di tutti i parametri degli strumenti in funzione delle proprie esigenze.**
- **Touch screen capacitivo per il controllo di:**
  - **Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,**
  - **Accensione e spegnimento lampada scialitica,**
  - **Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,**
  - **Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",**
  - **Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.**
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoleta portatray singolo su braccio articolato.

**STRUMENTAZIONE**

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- **Modulo con micromotore elettrico EU093 ad induzione con controllo di coppia e doppio led bianco e blu UV.**
- Ablatore a Led P-E.
- Lampada fotopolimerizzante EU-H.

**CONSOLLE ASSISTENTE**

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
  - **Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,**
  - **Accensione e spegnimento lampada scialitica,**
  - **Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,**
  - **Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".**
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

**GRUPPO IDRICO**

- Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.
- Safespray

**POLTRONA AGO4-EVO**

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.

**PEDALIERA WIRELESS MULTIFUNZIONE**

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Possibilità di personalizzare i comandi secondo le proprie esigenze.

**LAMPADA SCIALITICA A LED EU MAIA**

- Intensità luminosa 35000 lux, temperatura di colore 5000° K.
- Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Rotazione su 2 assi.

**LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE EU-H**

Lampada fotopolimerizzante EU-H con due programmi (ortodontico e standard) con potenze regolabili da 1000 a 1800 mW/cm<sup>2</sup> e lunghezza d'onda da 420 nm a 480 nm



VALORE COMMERCIALE  
**€ 600**  
**IN OMAGGIO CON L'OFFERTA**

**LAMPADA A LED EU MAIA**

La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.

- Intensità luminosa da 3.000 a 35.000 lux.
- Temperatura di colore 5.000° K.
- Dimensioni spot luminoso 85 x170 mm.
- Rotazione su 2 assi.
- Regolazione dell'intensità luminosa.
- Con parabola riflettente.
- Maniglie smontabili e autoclavabili.



VALORE COMMERCIALE  
**€ 1.800**  
**IN OMAGGIO CON L'OFFERTA**

**ABLATORE A LED P-E**

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS.



Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE  
**€ 1.300**  
**IN OMAGGIO CON L'OFFERTA**

**MOTORE INDUZIONE EU093**

Per endodonzia e chirurgia: velocità di rotazione compresa fra 80 e 40.000 giri/min. Il primo micromotore dentale provvisto di doppia luce LED bianco e blu UV. Torque: 3,5 Nw/cm

- rimozione di vecchi restauri in composito, permette di capire se la resina è stata completamente rimossa durante la perforazione;
- strumento di rilevamento della carie durante la perforazione;
- finitura e lucidatura di compositi e facilitazione della rimozione dei cementi adesivi;
- controllo post-operatorio dei margini di riempimento del composito.



VALORE COMMERCIALE  
**€ 2.710**  
**IN OMAGGIO CON L'OFFERTA**

MADE IN SWISS-GARANZIA 3 ANNI

**SAFESPRAY**

Un contenitore pressurizzato che consente l'utilizzo di acqua distillata (eventualmente addizionata con igienizzanti) destinata agli spray di tutti gli strumenti della tavoletta medico e della siringa assistente.



VALORE COMMERCIALE  
**€ 382**  
**IN OMAGGIO CON L'OFFERTA**

APPROFITTA

**SCONTO**  
**50%**  
**+**  
**INCENTIVI FISCALI**

VALORE RIUNITO € **25.198**

**-50% SCONTO**

PREZZO SCONTATO € **12.599**

**-10% CREDITO D'IMPOSTA per professionisti ed srl**

COSTO REALE € **11.339**

A SOLI AL MESE € **214,18\***

\*Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Promozione valida fino al 30/06/2021

# EURODENT®

Treat yourself!

## RIUNITO ABSOLUTE



Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.

### PROMO EXCELLENT

#### CONSOLLE ODONTOIATRA

- Regolazione indipendente della velocità e della potenza dei motori, degli ablatori e degli spray di tutti gli strumenti.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo anti retraction valve agli strumenti.
- **Display per il controllo di tutti i parametri degli strumenti in funzione delle proprie esigenze.**
- **Touch screen capacitivo per il controllo di:**
  - **Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa.**
  - **Accensione e spegnimento lampada scialitica.**
  - **Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati.**
  - **Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".**
  - **Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.**
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoletta portatray doppia su braccio articolato.

#### STRUMENTAZIONE

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina proporzionale a fibre ottiche.
- **Modulo con micromotore elettrico EU093 ad induzione con controllo di coppia e doppio led bianco e blu UV.**
- Ablatore a Led P-E.

#### CONSOLLE ASSISTENTE

- Doppio braccio articolato e pantografato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
  - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa.
  - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
  - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati.
  - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Predisposizione per ulteriori 2 strumenti: siringa e lampada polimerizzante.

#### GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotante di 140° estraibile e autoclavabile.
- Fontanella riempimento bicchiere asportabile e autoclavabile.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido, completa di valvola per aspirazione centralizzata.
- Safespray.

#### POLTRONA AGO4

- Poltrona elettromeccanica completa di braccio sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita-discesa della seduta, salita-discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.

#### PEDALIERA WIRELESS MULTIFUNZIONE

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Possibilità di personalizzare i comandi secondo le proprie esigenze.

#### LAMPADA SCIALITICA A LED EU MAIA

- Intensità luminosa 35000 lux, temperatura di colore 5000° K.
- Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Rotazione su 2 assi.

APPROFITTA

SCONTO

# 50%

+  
INCENTIVI  
FISCALI

#### LAMPADA A LED EU MAIA

La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.

- Intensità luminosa da 3.000 a 35.000 lux.
- Temperatura di colore 5.000° K.
- Dimensioni spot luminoso 85 x170 mm.
- Rotazione su 2 assi.
- Regolazione dell'intensità luminosa.
- Con parabola riflettente.
- Maniglie smontabili e autoclavabili.



VALORE COMMERCIALE  
**€ 1.800**

**IN OMAGGIO CON L'OFFERTA**

#### ABLATORE A LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS.



Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE  
**€ 1.300**

**IN OMAGGIO CON L'OFFERTA**

#### MOTORE INDUZIONE EU093

Per endodonzia e chirurgia: velocità di rotazione compresa fra 80 e 40.000 giri/min. Il primo micromotore dentale provvisto di doppia luce LED bianco e blu UV. Torque: 3,5 Nw/cm ragione; - finitura e lucidatura di compositi e facilitazione della rimozione dei cementi adesivi; - controllo post-operatorio dei margini di riempimento del composito.



MADE IN SWISS-GARANZIA 3 ANNI

VALORE COMMERCIALE  
**€ 2.710**

**IN OMAGGIO CON L'OFFERTA**

#### SAFESPRAY

Un contenitore pressurizzato che consente l'utilizzo di acqua distillata (eventualmente addizionata con igienizzanti) destinata agli spray di tutti gli strumenti della tavoletta medico e della siringa assistente.



VALORE COMMERCIALE  
**€ 382**

**IN OMAGGIO CON L'OFFERTA**

A SOLI AL MESE **€ 259,83\***

\*Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Promozione valida fino al 30/06/2021

VALORE RIUNITO **€ 30.998**

**-50% SCONTO**

PREZZO SCONTATO **€ 15.499**

**-10% CREDITO D'IMPOSTA per professionisti ed srl**

COSTO REALE **€ 13.949**



Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.

**PROMO DIGITAL 4.0**

- CONSOLLE ODONTOIATRA**
- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
  - Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
  - Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
  - Tastiera a membrana per il controllo di:
    - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
    - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
    - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
    - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
    - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
  - Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
  - Tavoleta portatray singolo su braccio articolato.

- STRUMENTAZIONE**
- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
  - Modulo per turbina a fibre ottiche.
  - Modulo con micromotore elettrico ad induzione EU033.
  - Ablatore a Led P-E.

- CONSOLLE ASSISTENTE**
- Doppio braccio articolato.
  - Due canule per aspirazione chirurgica.
  - Alloggiamento per strumento supplementare.
  - Tastiera a membrana per il controllo di:
    - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
    - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
    - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
    - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
  - Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

- GRUPPO IDRICO**
- Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
  - Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
  - Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.

- POLTRONA AGO4**
- Poltrona elettromeccanica completa di braccio sinistro bianco.
  - 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale)
  - 4 posizioni programmabili.
  - Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
  - Appoggiatesta con doppia articolazione.
  - Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
  - Stability Kit.

- PEDALIERA MULTIFUNZIONE**
- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
  - Attivazione spray e chip air.
  - Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
  - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

- LAMPADA SCIALITICA A LED EU MAIA**
- Intensità luminosa 35000 lux , temperatura di colore 5000° K.
  - Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
  - Rotazione su 2 assi.

- PACCHETTO DIGITAL 4.0\*\***
- PC integrato EU Medical
  - Telecamera intraorale EU

APPROFITTA

**SCONTO**  
**50%**  
+  
**INCENTIVI FISCALI**

**LAMPADA CON TELECAMERA EU ALYA-CAM**

Lampada operatoria Alya con telecamera e Theia Tech, lampada a led integrata nel braccio che offre un'adeguata illuminazione sull'intera area di lavoro. Lampada a led con regolazione dell'intensità da 3.000 a 50.000 lux e CRI 97, per una reale percezione dei colori. Software nativo dall'utilizzo facile e intuitivo per Windows, Mac ed Android.

- Condivisione del materiale video e fotografico con tutto il team attraverso l'inoltro di una semplice mail
- Possibilità di condividere, rivedere e rendere accessibili i diversi report sulle principali tipologie di device
- Inquadratura primaria direttamente sulla zona d'interesse (cavo orale)
- Zoom adeguato per l'area lavorativa.



VALORE COMMERCIALE  
**€ 6.180**

**PREZZO AGGIUNTIVO IN ALTERNATIVA ALLA TELECAMERA INTRAORALE € 3.299**

**PC INTEGRATO EU MEDICAL**

Pc integrato da 18,5" con monitor touchscreen, risoluzione 1366x768 pixel, VESA 100x100mm, processore Intel I3 Dual core, disco rigido SSD 128GB, RAM 4GB, LAN 10/100/1000 MBPS, Wireless LAN, alimentatore 12v separato, Windows 10 Professional, sistema di sterilizzazione LED UVC incorporata. Certificazione frontale impermeabile IP65 + EN6060112:2015 93/42/EEC.



VALORE COMMERCIALE  
**€ 3.100**

**IN OMAGGIO CON L'OFFERTA**

Completo di mouse e mini tastiera wireless  
Completo di supporto fisso 120 mm  
Completo di blocchetto regolabile e cablaggio per PC

**TELECAMERA INTRAORALE EU**

Video camera intraorale digitale usb, sensore Cmos con lenti liquide. Risoluzione VGA, HD e FULL HD. Dal manipo è possibile controllare intensità led, funzione RX, autofocus digitale automatico in continuo/manuale prescatto e gyromouse a due tasti.



VALORE COMMERCIALE  
**€ 1.200**

**IN OMAGGIO CON L'OFFERTA**

Programmabile per utilizzo con software di immagini più comuni  
Driver Twain avanzato

\*\* Rilascio scheda tecnica e perizia giurata per documentazione 4.0

**A SOLI AL MESE € 220,97\***

\*Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Promozione valida fino al 30/06/2021

**VALORE RIUNITO € 25.996**

**-50% SCONTO**

**PREZZO SCONTATO € 12.998**

**-50% CREDITO D'IMPOSTA per srl odontoiatriche**

**COSTO REALE € 6.499**

# POGGIATESTA BIOS: POSIZIONE OTTIMALE PER IL LAVORO, COMFORT PER IL PAZIENTE



Il poggiatesta Bios (opzionale), grazie alle sue peculiari caratteristiche di mobilità e bloccaggio, **consente di posizionare correttamente la testa del paziente accompagnandone i movimenti articolari, ottenendo così il massimo comfort.**

Un corretto assetto operativo ed un paziente comodo e rilassato, permettono di operare con più tranquillità e sicurezza.

Grazie al dispositivo pneumatico di Bios è possibile **movimentare, adattare e bloccare rapidamente il poggiatesta nella posizione ottimale** senza il minimo sforzo e senza stringere blocchi meccanici. Le movimentazioni di Bios seguono l'articolazione orbitale delle vertebre interessate.

**Bios permette di ottenere con grande precisione e stabilità ogni posizione ed assetto operativo.**

## APPROFITTA DEGLI STRAORDINARI INCENTIVI FISCALI 2021

### Beni strumentali 4.0 (ex iper)

#### **SEI UNA SRL ODONTOIATRICA?**

Se acquisti un riunito Eurodent 4.0 interconnesso, esso produrrà un **credito d'imposta del 50%**, ma solo se ad acquistarlo sarà una srl odontoiatrica (non applicabile allo studio professionale). I termini di fruibilità del credito d'imposta è di 3 anni.

### Credito d'imposta 10% (ex super)

#### **SEI UNO STUDIO TRADIZIONALE O UNA SRL ODONTOIATRICA?**

Se acquisti un riunito Eurodent, esso produrrà un **credito d'imposta del 10%**, fruibile in un solo anno e a compensazione immediata. Il vantaggio fiscale è immediatamente spendibile nello stesso anno in cui viene fatto l'investimento.

**Contattaci per maggiori informazioni e/o consulta il tuo commercialista.  
Il beneficio fiscale termina il 31 dicembre 2021.**



SCEGLIAMO ITALIANO



Via Rossini, 26 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)  
Tel. 051 780465 - Fax 051 781625  
[eurodent@eurodent.it](mailto:eurodent@eurodent.it) - [www.eurodent.it](http://www.eurodent.it)

Responsabile commerciale:  
Sig. ra Giovanna Dozio - Cell. 393 8875521

# EURODENT®

Treat yourself!