

EURODENT

Julio 2021

Treat yourself!

**Aproveche
el momento:**
descubra nuestras
increíbles ofertas
en toda la gama
de equipos dentales
Eurodent

NOVEDADES

ISO/OS, el consultorio
de cirugía oral

NOVEDADES

ISOFLEX, el equipo dental
con ergonomía BESPOKE

ISO/OS: SU CONSULTORIO QUIRÚRGICO INTEGRADO

NOVEDAD




ISOCART:

Dotado de cinco compartimientos para instrumentos, se puede equipar en función de las necesidades de cada profesional. Permite el uso de agua destilada para los sprays de los instrumentos.



EDGE:

Sillón quirúrgico accionado por cuatro accionadores lineales mediante un mando de pedal inalámbrico multifunción. Con sistema trendelenburg y rieles laterales.

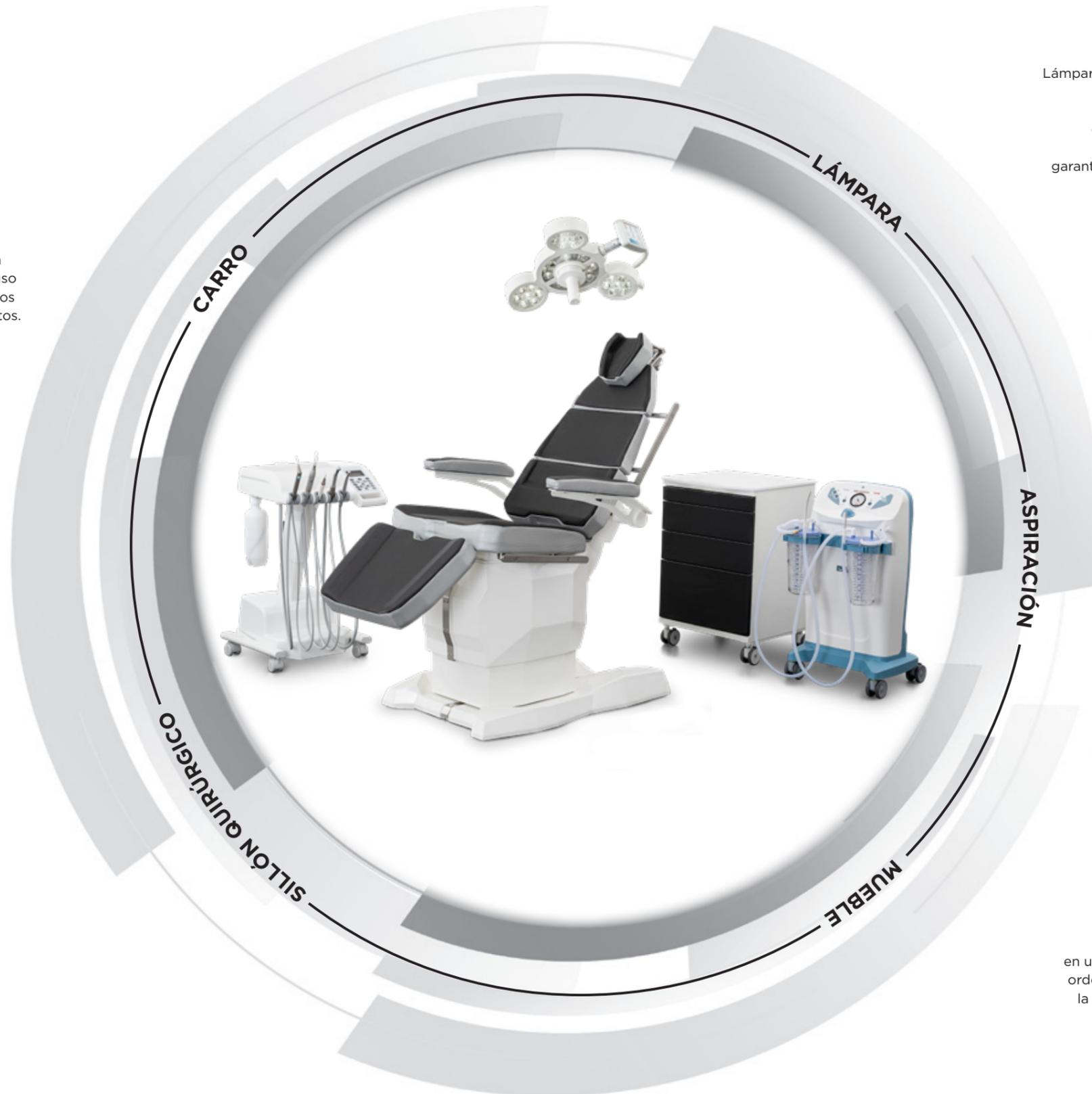

Lámpara LED de última generación, que garantiza luz fría, larga duración y bajo consumo de energía. El área visual queda perfectamente iluminada, garantizando óptimas condiciones de trabajo y de confort.



Una aspiración selectiva y precisa de la sangre, los tejidos y los fragmentos óseos. Dotado de doble depósito para garantizar mayor continuidad del trabajo y eliminar las paradas de la máquina.



El mueble se convierte en un elemento de organización, orden y eficiencia, garantizando la disponibilidad inmediata del instrumental.



Un proyecto ambicioso, que Eurodent pone a disposición de los profesionales que exigen los mejores instrumentos y recursos en el ámbito de la cirugía oral.

ISOFLEX: ERGONOMÍA A MEDIDA

NOVEDAD



Eurodent conoce la importancia de la ergonomía. Ahora, con ISOFLEX, la ha llevado al máximo nivel: este nuevo concepto de trabajo permite al profesional hallar siempre la posición ideal en torno al paciente, gracias a un sistema que se adapta a las diferentes disciplinas y hábitos operativos. La libertad ofrecida por ISOFLEX favorece la máxima flexibilidad y fluidez en el trabajo, con el fin de alcanzar siempre el mejor resultado del tratamiento.

DESDE

€ 5.192

Transporte, montaje e IVA excluidos.
Promoción válida hasta el 31/12/2021

EURODENT®

Treat yourself!

EQUIPO ISOPLUS



Las fotografías son indicativas. A los efectos de la promoción, se tomará como válida la descripción.

PROMO ESSENTIAL

CONSOLA DEL ODONTÓLOGO

- Regulación independiente de la potencia y de los sprays de cada instrumento.
- Sistema de seguridad para la selección automática de los instrumentos.
- Dispositivo Anti Retraction Valve (válvula antirretracción) para los instrumentos.
- Teclado de membrana para el control de:
 - Movimientos del sillón y activación de sus programas,
 - Encendido y apagado de la lámpara cálitica,
 - Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados,
 - Activación de los programas automáticos de enjuague y de última posición,
 - Control de todas las funciones de los instrumentos.
- Bandeja para instrumentos con protección de silicona y manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
- Bandeja portatray con brazo articulado.

INSTRUMENTOS

- Módulo con jeringa de aire - agua - spray.
- Módulo para turbina de fibra óptica.
- Módulo con micromotor eléctrico EU 033 de inducción.
- Módulo de ultrasonidos led P-E

CONSOLA DEL ASISTENTE

- Doble brazo articulado.
- Dos cánulas de aspiración quirúrgica.
- Alojamiento para instrumento adicional.
- Teclado de membrana para el control de:
 - Movimientos del sillón y activación de sus programas,
 - Encendido y apagado de la lámpara cálitica,
 - Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados,
 - Activación de los programas automáticos de enjuague y de última posición.
- Manija de desplazamiento desmontable y autoclavable.

GRUPO HÍDRICO

- Escupidera de cerámica con movimiento de 160°, extraíble y autoclavable.
- Grifos para el llenado del vaso y lavado de la escupidera desmontables y autoclavables.
- Aspiración prevista para anillo húmedo o líquido.

SILLÓN AG04

- Sillón electromecánico con apoyabrazos izquierdo blanco.
- 4 movimientos guiados (subida/bajada del asiento, subida/bajada del respaldo).
- 4 posiciones programables.
- Trendelenburg sincronizado con el respaldo.
- Apoyacabezas con doble articulación.
- Dispositivos de seguridad antiplastamiento en la base y en el espaldar.
- Kit de estabilidad.

PEDALES

- Activación y regulación de la velocidad o potencia de los instrumentos.
- Activación de sprays y chip air.
- Activación de los movimientos del sillón y de sus programas.
- Activación de los programas automáticos de enjuague y última posición.

LÁMPARA CÁLITICA DE LED EU MAIA

- Intensidad luminosa 35000 lx, temperatura de color 5000 K.
- Manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
- Rotación en 2 ejes.

DESCUENTO 50%

APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD

LÁMPADA LED EU MAIA

Con tecnología led, el perfecto equilibrio del sistema de rotación permite la colocación ideal del haz luminoso. La precisa definición del spot luminoso impide la luminosidad, protegiendo los ojos del paciente.

- Intensidad luminosa: de 3000 a 35000 lx.
- Temperatura de color: 5000 K.
- Dimensiones del spot luminoso: 85 x 170 mm.
- Rotación en 2 ejes.
- Regulación de la intensidad luminosa.
- Parábola reflectante.
- Manijas desmontables y autoclavables.



VALOR
COMERCIAL
€ 1.800

**DE REGALO
CON LA OFERTA**

MÓDULO DE ULTRASONIDOS EU LED P-E

Módulo de ultrasonidos piezoeléctrico de fibra óptica por leds, con funciones de escarificación, periodoncia y endodoncia, compatible con insertos EMS.



Las vibraciones generadas son absolutamente lineales y longitudinales, con búsqueda automática de la frecuencia en función del inserto utilizado.

VALOR
COMERCIAL
€ 1.300

**DE REGALO
CON LA OFERTA**

MOTOR DE INDUCCIÓN EU 033

Micromotor de inducción EU 033 para intervenciones conservativas clásicas, preparaciones y profilaxis. Iluminación led.



Velocidad de rotación comprendida entre 1.000 y 40.000 rpm
Par: 3,5 N/cm

**MADE IN SWITZERLAND
3 AÑOS DE GARANTÍA**

VALOR
COMERCIAL
€ 2.324

**DE REGALO
CON LA OFERTA**

PRECIO
DE LISTA **€ 20.998**

-50% DESCUENTO

DESDE **€ 10.499**

AL MES
DESDE **€ 173***

*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales.
Transporte, montaje e IVA excluidos. Folletos informativos,
tasas y condiciones en la entidad financiadora.
Promoción válida hasta el 31/12/2021

EURODENT®

Treat yourself!

EQUIPO ISOPLUS

GARANTÍA 3 AÑOS
3
GARANTÍA 3 AÑOS

Las fotografías son indicativas. A los efectos de la promoción, se tomará como válida la descripción.



TAPIZADO VISCOLÁSTICO

Gracias a las características del material utilizado, el tapizado viscoelástico aumenta el volumen del asiento, adaptándose al cuerpo del paciente y distribuyendo uniformemente la presión.

VALOR COMERCIAL

€ **880**

DE REGALO CON LA OFERTA

LÁMPARA LED EU MAIA

Con tecnología led, el perfecto equilibrio del sistema de rotación permite la colocación ideal del haz luminoso. La precisa definición del spot luminoso impide la luminosidad, protegiendo los ojos del paciente.

- Intensidad luminosa: de 3000 a 35000 lx.
- Temperatura de color: 5000 K.
- Dimensiones del spot luminoso: 85 x 170 mm.
- Rotación en 2 ejes.
- Regulación de la intensidad luminosa.
- Parábola reflectante.
- Manijas desmontables y autoclavables.



VALOR COMERCIAL

€ **1.800**

DE REGALO CON LA OFERTA

MÓDULO DE ULTRASONIDOS EU LED P-E

Módulo de ultrasonidos piezoeléctrico de fibra óptica por leds, con funciones de escarificación, periodoncia y endodoncia, compatible con insertos EMS.



Las vibraciones generadas son absolutamente lineales y longitudinales, con búsqueda automática de la frecuencia en función del inserto utilizado.

VALOR COMERCIAL

€ **1.300**

DE REGALO CON LA OFERTA

MOTOR DE INDUCCIÓN EU 033

Micromotor de inducción EU 033 para intervenciones conservativas clásicas, preparaciones y profilaxis. Iluminación led.



Velocidad de rotación comprendida entre 1.000 y 40.000 rpm
Par: 3,5 N/cm

MADE IN SWITZERLAND
3 AÑOS DE GARANTÍA

VALOR COMERCIAL

€ **2.324**

DE REGALO CON LA OFERTA

SAFESPRAY

Un recipiente presurizado que permite el uso de agua destilada (eventualmente con higienizantes), destinada a los sprays de todos los instrumentos de la consola del odontólogo y de la jeringa del asistente.



VALOR COMERCIAL

€ **382**

DE REGALO CON LA OFERTA

LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZACIÓN EU-H

Lámpara de fotopolimerización EU-H con dos programas (ortodóntico y estándar), con potencias regulables de 1000 a 1800 mW/cm² y longitud de onda de 420 nm a 480 nm.



VALOR COMERCIAL

€ **600**

DE REGALO CON LA OFERTA

PROMO MUST

CONSOLA DEL ODONTÓLOGO

- Regulación independiente de la potencia y de los sprays de cada instrumento.
- Sistema de seguridad para la selección automática de los instrumentos.
- Dispositivo Anti Retraction Valve (válvula antirretracción) para los instrumentos.
- Teclado de membrana para el control de:
 - Movimientos del sillón y activación de sus programas,
 - Encendido y apagado de la lámpara cálitica,
 - Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados,
 - Activación de los programas automáticos de enjuague y de última posición,
 - Control de todas las funciones de los instrumentos.
- Bandeja para instrumentos con protección de silicona y manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
- Bandeja portatray con brazo articulado.

INSTRUMENTOS

- Módulo con jeringa de aire - agua - spray.
- Módulo para turbina de fibra óptica.
- Módulo con micromotor eléctrico EU 033 de inducción.
- Módulo de ultrasonidos led P-E
- Lámpara de fotopolimerización EU-H

CONSOLA DEL ASISTENTE

- Doble brazo articulado.
- Dos cánulas de aspiración quirúrgica.
- Alojamiento para instrumento adicional.
- Teclado de membrana para el control de:
 - Movimientos del sillón y activación de sus programas,
 - Encendido y apagado de la lámpara cálitica,
 - Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados,
 - Activación de los programas automáticos de enjuague y de última posición.
- Manija de desplazamiento desmontable y autoclavable.

GRUPO HÍDRICO

- Escupidera de cerámica con movimiento de 160°, extraíble y autoclavable.
- Grifos para el llenado del vaso y lavado de la escupidera desmontables y autoclavables.
- Aspiración prevista para anillo húmedo o líquido.
- Safespray

SILLÓN AG04

- Sillón electromecánico con apoyabrazos izquierdo blanco.
- 4 movimientos guiados (subida/bajada del asiento, subida/bajada del respaldo).
- 4 posiciones programables.
- Trendelenburg sincronizado con el respaldo.
- Apoyacabezas con doble articulación.
- Dispositivos de seguridad antiplastamiento en la base y en el espaldar.
- Kit de estabilidad.
- Tapizado quirúrgico.

PEDALES

- Activación y regulación de la velocidad o potencia de los instrumentos.
- Activación de sprays y chip air.
- Activación de los movimientos del sillón y de sus programas.
- Activación de los programas automáticos de enjuague y última posición.

LÁMPARA CIALÍTICA DE LED EU MAIA

- Intensidad luminosa 35000 lx, temperatura de color 5000 K.
- Manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
- Rotación en 2 ejes.

PRECIO DE LISTA € **23.938**

-50% DESCUENTO

DESDE € **11.969**

AL MES DESDE € **194***

*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales. Transporte, montaje e IVA excluidos. Folletos informativos, tasas y condiciones en la entidad financiadora. Promoción válida hasta el 31/12/2021

EURODENT®

Treat yourself!

EQUIPO ISOTRON

GARANTÍA 3 AÑOS
3
GARANTÍA 3 AÑOS

Las fotografías son indicativas. A los efectos de la promoción, se tomará como válida la descripción.

PROMO ADVANCED

CONSOLA DEL ODONTÓLOGO

- Regulación independiente de la potencia y de los sprays de cada instrumento.
- Sistema de seguridad para la selección automática de los instrumentos.
- Dispositivo Anti Retraction Valve (válvula antirretracción) para los instrumentos.
- **Display para el control de todos los parámetros de los instrumentos, en función de sus necesidades.**
- **Pantalla táctil capacitiva para el control de:**
 - **Movimientos del sillón y activación de sus programas,**
 - **Encendido y apagado de la lámpara cialítica,**
 - **Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados,**
 - **Activación de los programas automáticos de enjuague y de última posición,**
 - **Control de todas las funciones de los instrumentos.**
- Bandeja para instrumentos con protección de silicona y manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
- Bandeja portatray con brazo articulado.

INSTRUMENTOS

- Módulo con jeringa de aire - agua - spray.
- Módulo para turbina de fibra óptica.
- **Módulo con micromotor eléctrico EU 093 de inducción con control de torque y doble led blanco y azul UV.**
- Módulo de ultrasonidos led P-E
- Lámpara de fotopolimerización EU-H

CONSOLA DEL ASISTENTE

- Doble brazo articulado.
- Dos cánulas de aspiración quirúrgica.
- Alojamiento para instrumento adicional.
- Teclado de membrana para el control de:
 - Movimientos del sillón y activación de sus programas,
 - Encendido y apagado de la lámpara cialítica,
 - Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados,
 - Activación de los programas automáticos de enjuague y última posición.
- Manija de desplazamiento desmontable y autoclavable.

GRUPO HÍDRICO

- Escupidera de cerámica con movimiento de 160°, extraíble y autoclavable.
- Grifos para el llenado del vaso y lavado de la escupidera desmontables y autoclavables.
- Aspiración prevista para anillo húmedo o líquido.
- Safespray

SILLÓN AG04

- Sillón electromecánico con apoyabrazos izquierdo blanco.
- 4 movimientos guiados (subida/bajada del asiento, subida/bajada del respaldo).
- 4 posiciones programables.
- Trendelenburg sincronizado con el respaldo.
- Apoyacabezas con doble articulación.
- Dispositivos de seguridad antiplastamiento en la base y en el espaldar.
- Kit de estabilidad.

PEDALES INALÁMBRICOS MULTIFUNCIÓN

- Activación y regulación de la velocidad o potencia de los instrumentos.
- Activación de sprays y chip air.
- Activación de los movimientos del sillón y de sus programas.
- Activación de los programas automáticos de enjuague y de última posición.
- Posibilidad de personalizar los mandos en función de sus necesidades.

LÁMPARA CIALÍTICA DE LED EU MAIA

- Intensidad luminosa 35000 lx, temperatura de color 5000 K.
- Manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
- Rotación en 2 ejes.

DESCUENTO
50%
APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD

LÁMPADA LED EU MAIA

Con tecnología led, el perfecto equilibrio del sistema de rotación permite la colocación ideal del haz luminoso. La precisa definición del spot luminoso impide la luminosidad, protegiendo los ojos del paciente.

- Intensidad luminosa: de 3000 a 35000 lx.
- Temperatura de color: 5000 K.
- Dimensiones del spot luminoso: 85 x 170 mm.
- Rotación en 2 ejes.
- Regulación de la intensidad luminosa.
- Parábola reflectante.
- Manijas desmontables y autoclavables.



VALOR COMERCIAL
€ 1.800
DE REGALO CON LA OFERTA

MÓDULO DE ULTRASONIDOS EU LED P-E

Módulo de ultrasonidos piezoeléctrico de fibra óptica por leds, con funciones de escarificación, periodoncia y endodoncia, compatible con insertos EMS.



Las vibraciones generadas son absolutamente lineales y longitudinales, con búsqueda automática de la frecuencia en función del inserto utilizado.

VALOR COMERCIAL
€ 1.300
DE REGALO CON LA OFERTA

MOTOR DE INDUCCIÓN EU 093

Para endodoncia y cirugía. Velocidad de rotación comprendida entre 80 y 40.000 rpm. El primer micromotor dental dotado de doble luz led, blanca y azul UV. Par: 3,5 N/cm

- extracción de viejas reparaciones de compuesto; permite saber si la resina ha sido completamente extraída durante la perforación;
- instrumento para la detección de caries durante la perforación;
- acabado y pulido de compuestos; facilita la extracción de cementos adhesivos;
- control posoperatorio de los márgenes de llenado del compuesto.

MADE IN SWITZERLAND
3 AÑOS DE GARANTÍA



VALOR COMERCIAL
€ 2.710
DE REGALO CON LA OFERTA

SAFESPRAY

Un recipiente presurizado que permite el uso de agua destilada (eventualmente con higienizantes), destinada a los sprays de todos los instrumentos de la consola del odontólogo y de la jeringa del asistente.



VALOR COMERCIAL
€ 382
DE REGALO CON LA OFERTA

LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZACIÓN EU-H

Lámpara de fotopolimerización EU-H con dos programas (ortodóntico y estándar), con potencias regulables de 1000 a 1800 mW/cm² y longitud de onda de 420 nm a 480 nm.



VALOR COMERCIAL
€ 600
DE REGALO CON LA OFERTA

PRECIO DE LISTA **€ 26.458**

-50% DESCUENTO

DESDE **€ 13.229**

AL MES DESDE **€ 214***

*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales. Transporte, montaje e IVA excluidos. Folletos informativos, tasas y condiciones en la entidad financiadora. Promoción válida hasta el 31/12/2021

EURODENT®

Treat yourself!

EQUIPO ABSOLUTE

GARANTÍA 3 AÑOS
3
GARANTÍA 3 AÑOS

Las fotografías son indicativas. Al los efectos de la promoción, se tomará como válida la descripción.

PROMO EXCELLENT

CONSOLA DEL ODONTÓLOGO

- Regulación independiente de la velocidad y de la potencia de los motores, de los ultrasonidos y de los sprays de todos los instrumentos.
- Sistema de seguridad para la selección automática de los instrumentos.
- Dispositivo Anti Retraction Valve para los instrumentos.
- **Display para el control de todos los parámetros de los instrumentos, en función de sus necesidades.**
- **Pantalla táctil con capacidad para el control de:**
 - **Movimientos del sillón y activación de sus programas**
 - **Encendido y apagado de la lámpara cialítica.**
 - **Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados.**
 - **Activación de los programas automáticos de escupidera y de la última posición.**
 - **Control de todas las funciones de los instrumentos.**
- Bandeja para instrumentos con protección e silicona y manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
- Bandeja portatray doble con brazo articulado.

INSTRUMENTOS

- Módulo con jeringa de aire - agua - spray.
- Módulo para turbina **proporcional** de fibra óptica.
- **Módulo con micromotor eléctrico EU 093 de inducción con control de torque y doble led blanco y azul UV.**
- Módulo de ultrasonidos led P-E
- Lámpara de fotopolimerización EU-H

CONSOLA DEL ASISTENTE

- Doble brazo articulado.
- Dos cánulas de aspiración quirúrgica.
- Teclado de membrana para el control de:
 - Movimientos del sillón y activación de sus programas.
 - Encendido y apagado de la lámpara cialítica.
- Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados.
- Activación de los programas automáticos de enjuague y última posición.
- Predisposición para 2 instrumentos adicionales: jeringa y lámpara polimerizadora.

GRUPO HÍDRICO

- Escupidera de cerámica con movimiento de 140°, extraíble y autoclavable.
- Grifos para el llenado del vaso y lavado de la escupidera desmontables y autoclavables.
- Aspiración prevista para un motor de anillo húmedo o líquido, con válvula de aspiración centralizada.
- Safespray.

SILLÓN AG04

- Sillón electromecánico con apoya brazo izquierdo blanco.
- 4 movimientos guiados (subida/bajada del asiento, subida/bajada del respaldo).
- 4 posiciones programables.
- Trendelenburg sincronizado con el respaldo
- Apoyacabezas con doble articulación.
- Dispositivos de seguridad antiplastamiento en la base y en el espaldar.

PEDAL INALÁMBRICO MULTIFUNCIÓN

- Activación y regulación de la velocidad o potencia de los instrumentos.
- Activación de sprays y chip air.
- Activación de los movimientos del sillón y de sus programas.
- Activación de los programas automáticos de escupidera y última posición.
- Posibilidad de personalizar los mandos en función de sus necesidades.

LÁMPARA CIALÍTICA DE LED EU MAIA

- Intensidad luminosa 35000 lx, temperatura de color 5000° K.
- Manijas desmontables y autoclavables.
- Rotación en 2 ejes.

DESCUENTO 50%

APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD

LÁMPADA LED EU MAIA

Con tecnología led, el perfecto equilibrio del sistema de rotación permite la colocación ideal del haz luminoso. La precisa definición del spot luminoso impide la luminosidad, protegiendo los ojos del paciente.

- Intensidad luminosa: de 3000 a 35000 lx.
- Temperatura de color: 5000 K.
- Dimensiones del spot luminoso: 85 x 170 mm.
- Rotación en 2 ejes.
- Regulación de la intensidad luminosa.
- Parábola reflectante.
- Manijas desmontables y autoclavables.



VALOR COMERCIAL
€ 1.800

**DE REGALO
CON LA OFERTA**

MÓDULO DE ULTRASONIDOS EU LED P-E

Módulo de ultrasonidos piezoeléctrico de fibra óptica por leds, con funciones de escarificación, periodoncia y endodoncia, compatible con insertos EMS.



Las vibraciones generadas son absolutamente lineales y longitudinales, con búsqueda automática de la frecuencia en función del inserto utilizado.

VALOR COMERCIAL
€ 1.300

**DE REGALO
CON LA OFERTA**

MOTOR DE INDUCCIÓN EU 093

Para endodoncia y cirugía. Velocidad de rotación comprendida entre 80 y 40.000 rpm. El primer micromotor dental dotado de doble luz led, blanca y azul UV. Par: 3,5 N/cm

- extracción de viejas reparaciones de compuesto; permite saber si la resina ha sido completamente extraída durante la perforación;
- instrumento para la detección de caries durante la perforación;
- acabado y pulido de compuestos; facilita la extracción de cementos adhesivos;
- control posoperatorio de los márgenes de llenado del compuesto.

**MADE IN SWITZERLAND
3 AÑOS DE GARANTÍA**



VALOR COMERCIAL
€ 2.710

**DE REGALO
CON LA OFERTA**

SAFESPRAY

Un recipiente presurizado que permite el uso de agua destilada (eventualmente con higienizantes), destinada a los sprays de todos los instrumentos de la consola del odontólogo y de la jeringa del asistente.



VALOR COMERCIAL
€ 382

**DE REGALO
CON LA OFERTA**

LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZACIÓN EU-H

Lámpara de fotopolimerización EU-H con dos programas (ortodóntico y estándar), con potencias regulables de 1000 a 1800 mW/cm² y longitud de onda de 420 nm a 480 nm.



VALOR COMERCIAL
€ 600

**DE REGALO
CON LA OFERTA**

PRECIO DE LISTA **€ 32.548**

-50% DESCUENTO

DESDE **€ 16.274**

AL MES DESDE **€ 260***

*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales. Transporte, montaje e IVA excluidos. Folletos informativos, tasas y condiciones en la entidad financiadora. Promoción válida hasta el 31/12/2021



Las fotografías son indicativas. A los efectos de la promoción, se tomará como válida la descripción.

PROMO DIGITAL

CONSOLA DEL ODONTÓLOGO

- Regulación independiente de la potencia y de los sprays de cada instrumento.
- Sistema de seguridad para la selección automática de los instrumentos.
- Dispositivo Anti Retraction Valve (válvula antirretracción) para los instrumentos.
- Teclado de membrana para el control de:
 - Movimientos del sillón y activación de sus programas,
 - Encendido y apagado de la lámpara cialítica,
 - Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados,
 - Activación de los programas automáticos de enjuague y de última posición,
 - Control de todas las funciones de los instrumentos.
- Bandeja para instrumentos con protección de silicona y manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
- Bandeja portatray con brazo articulado.

INSTRUMENTOS

- Módulo con jeringa de aire - agua - spray.
- Módulo para turbina de fibra óptica.
- Módulo con micromotor eléctrico EU O33 de inducción.
- Módulo de ultrasonidos led P-E

CONSOLA DEL ASISTENTE

- Doble brazo articulado.
- Dos cánulas de aspiración quirúrgica.
- Alojamiento para instrumento adicional.
- Teclado de membrana para el control de:
 - Movimientos del sillón y activación de sus programas,
 - Encendido y apagado de la lámpara cialítica,
 - Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados,
 - Activación de los programas automáticos de enjuague y de última posición.
- Manija de desplazamiento desmontable y autoclavable.

GRUPO HÍDRICO

- Escupidera de cerámica con movimiento de 160°, extraíble y autoclavable.
- Grifos para el llenado del vaso y lavado de la escupidera desmontables y autoclavables.
- Aspiración prevista para anillo húmedo o líquido.

SILLÓN AG04

- Sillón electromecánico con apoyabrazos izquierdo blanco.
- 4 movimientos guiados (subida/bajada del asiento, subida/bajada del respaldo).
- 4 posiciones programables.
- Trendelenburg sincronizado con el respaldo.
- Apoyacabezas con doble articulación.
- Dispositivos de seguridad antiplastamiento en la base y en el espaldar.
- Kit de estabilidad.

PEDALES

- Activación y regulación de la velocidad o potencia de los instrumentos.
- Activación de sprays y chip air.
- Activación de los movimientos del sillón y de sus programas.
- Activación de los programas automáticos de enjuague y última posición.

LÁMPARA CIALÍTICA DE LED EU MAIA

- Intensidad luminosa 35000 lx, temperatura de color 5000 K.
- Manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
- Rotación en 2 ejes.

PAQUETE DIGITAL

- Ordenador integrado EU Medical
- Cámara intraoral EU

DESCUENTO
50%
APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD

LÁMPARA CON CÁMARA EU ALYA-CAM

Lámpara operatoria Alya con cámara y Theia Tech, lámpara led integrada en el brazo, que ofrece una adecuada iluminación de toda el área de trabajo. Lámpara led con regulación de intensidad de 3.000 a 50.000 lx y CRI 97, para una percepción real de los colores.

Software nativo de uso fácil e intuitivo para Windows, Mac y Android.
• Transmisión de vídeos y fotografías a todo el equipo, mediante el envío de un simple correo electrónico • Posibilidad de compartir, revisar y hacer accesibles los diferentes informes sobre los principales tipos de servicios • Encuadre primario directamente en la zona involucrada (cavidad oral) • Zoom adecuado para el área de trabajo.



VALOR COMERCIAL
€ 6.180

PRECIO ADICIONAL EN ALTERNATIVA A LA CÁMARA INTRAORAL € 3.299

ORDENADOR INTEGRADO EU MEDICAL

Ordenador integrado de 18,5" con pantalla táctil, resolución 1366 x 768 pixeles, VESA 100 x 100 mm, procesador Intel I3 Dual Core, disco duro SSD 128 GB, RAM 4 GB, LAN 10/100/1000 MBPS, Wireless LAN, alimentador 12 V separado, Windows 10 Professional, **sistema de esterilización LED UVC incorporado.** Certificación frontal impermeable IP65 + EN6060112:2015 93/42/EEC.



VALOR COMERCIAL
€ 3.100
DE REGALO CON LA OFERTA

Con ratón y miniteclado wireless
Con soporte fijo 120 mm
Con bloque regulable y cableado para ordenador

CÁMARA INTRAORAL EU

Cámara de video intraoral digital USB, sensor Cmos con lentes líquidas. Resolución VGA, HD y FULL HD. Desde el mango es posible controlar: intensidad led, función RX, autoenfoco digital continuo automático/manual, predisparo y gyro mouse de dos botones.



VALOR COMERCIAL
€ 1.200
DE REGALO CON LA OFERTA

Programable para el uso con software de imágenes más comunes Driver Twain avanzado

PRECIO DE LISTA € 27.320

-50% DESCUENTO

DESDE € 13.660

AL MES DESDE € 221*

*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales. **Transporte, montaje e IVA excluidos.** Folletos informativos, tasas y condiciones en la entidad financiadora. **Promoción válida hasta el 31/12/2021**

APOYACABEZAS BIOS: POSICIÓN IDEAL PARA EL TRABAJO, CONFORT PARA EL PACIENTE



Gracias a sus especiales características de movilidad y bloqueo, **el apoyacabezas Bios** (opcional) **permite colocar correctamente la cabeza del paciente, acompañando sus movimientos articulares y garantizando así el máximo confort.**

Una correcta disposición operativa y un paciente cómodo y relajado permiten trabajar con mayor tranquilidad y seguridad.

Gracias al dispositivo neumático de Bios, es posible **desplazar, adaptar y bloquear rápidamente el apoyacabezas en la posición ideal**, sin esfuerzo alguno y sin apretar dispositivos mecánicos.

Los movimientos de Bios siguen los de las articulaciones de las vértebras involucradas.

Bios permite obtener cualquier posición y disposición operativa con gran precisión y estabilidad.

A MEDIDA PARA MÍ

"He optado por Eurodent porque es el equipo dental que me permite aprovechar al 100 % mis capacidades y experiencia. Puedo personalizar las configuraciones, adaptándolas a mi forma de trabajar, y moverme perfectamente en el espacio de trabajo. De esta forma cuento con las condiciones ideales para realizar los mejores tratamientos odontológicos"

Dr. Prof. Tiziano Di Carlo
Docente en la maestría de segundo nivel en prótesis fijas.
Sapienza - Universidad de Roma

Tu Eurodent Specialist es:

EURODENT®

Treat yourself!

Via Rossini, 26
40055 Villanova di Castenaso (BO), Italy
Tel. +39 051 780465 - Fax +39 051 781625
eurodent@eurodent.it - www.eurodent.it

Director comercial:
Señora Giovanna Dozio
Cell. +39 393 8875521
g.dozio@eurodent.it

